

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

N° de Orden

AB0098-1842

Fecha

4-jul.-25

Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

Tipo de Mantenimiento

1er Mantenimiento Preventivo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0011

Marca: DRÄGER

No. Prod: AB0098 Inventario: 200400069008

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: VENTILADOR VOLUMETRICO

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:

Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2941

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Sello de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Pedro Garcia Chacon

4-jul.-25

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Sello de Usuario
Dra. Claudia C. Osuna Saucedo
Médico Pediatra
Mat: IMSS 11043296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amelí C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Sello Firmador

RECORRIDO
04 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1
NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Sello de Unidad
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo


Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0011

No. Orden: AB0098-1842

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento

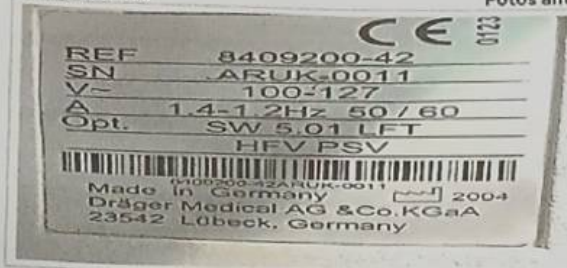

Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Pedro Garcia Chacon



4-jul.-25

[Signature]

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Firmador

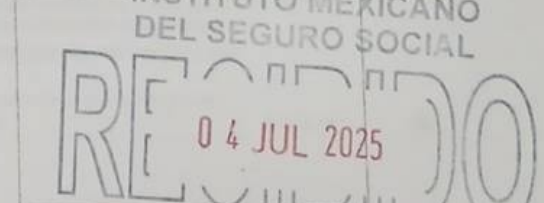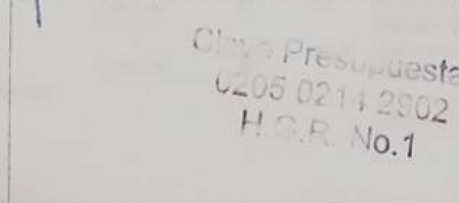

German Camacho
Av. Santa Fe, 170 Int. 8-411
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 02700 CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0098-1842

ID Actividad de Servicio:
ESD66D6B-9C18-41B4-9070-44922B654F2F

Babylog 8000

Funcional

Número de Inventario:
200400069008

Número de Serie:
ARUK-0011

Servicio Realizado por:
Pedro Garcia Chacon

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
04-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		+ Límites de advertencia del volumen minuto (VM)	Funcional
1.2 Número de la versión de software		3.3.4 "+" Advertencia "¿Tubo bloqueado?"	Funcional
Número de versión de software	5.01	+ Advertencia ¿Tubo bloqueado?	
1.3 Horas de funcionamiento		3.3.5 Advertencia de presión de las vías aéreas baja	Funcional
Horas de funcionamiento	53790 h	Advertencia de presión de las vías aéreas baja	
1.4 (Opción) Comunicación (disponible: Si/No)		3.3.6 Advertencia de presión de las vías aéreas alta	Funcional
Comunicación (disponible: si/no)	No	Advertencia de presión de las vías aéreas alta	
1.5 (Opción) HFV (disponible: Si/No)		3.3.7 Advertencia de fallo de O2 y AIR	Funcional
HFV (disponible: si/no)	Si	Las advertencias de fallo de O2 y AIR funcionan.	
1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: Si/No)		3.3.8 Prueba de hermeticidad	Funcional
PSV / VG (disponible: si/no)	Si	Prueba de hermeticidad	
3 Prueba de funcionamiento y de estado		3.3.9 Advertencia de fallo de la tensión de red / salvaguardia de datos	Funcional
3.1 Pruebas de estado		Advertencia de fallo de la tensión de red/salvaguardia de datos	
3.1.1 Documentos adjuntos		3.3.10 Introducción de los parámetros específicos del usuario	Funcional
Estado comprobado.	Funcional	Introducción de los parámetros específicos del usuario	
3.1.2 Aparato		4 Seguridad eléctrica	
El aparato y sus piezas no están dañados.	Funcional	4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.3 Carro		4.1.1 Examen visual	Funcional
El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas.	Funcional	Estado comprobado	
3.1.4 Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)		4.1.2 Resistencia de tierra de protección	0.270 Ohm
Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)	Funcional	Máximo valor medido.	
3.2 Pruebas de funcionamiento		4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	Funcional
3.2.1 Válvula de respiración de emergencia D3.1		Los puntos de medición se han explorado.	
Válvula de respiración de emergencia D3.1	Funcional	4.1.4 Corriente de fuga del equipo	4.1 µA
3.2.2 Válvula de seguridad inspiratoria Y3.3		Valor de referencia	
Prueba 1 (comportamiento de prueba del Babylog)	Funcional	Comprobación de repetición	4.7 µA
3.2.3 "+" Calibración del sensor de flujo		4.3 Medidas finales	
+ Calibración del sensor de flujo	Funcional	4.3.1 Entrega del aparato	Funcional
3.2.4 Calibración de O2 y concentración de O2		Entrega del dispositivo	
Concentración de O2	Funcional		
Calibración de O2	Funcional		
3.3 Funciones en el modo de funcionamiento			
3.3.1 IPPV		5 Medios de comprobación	
IPPV	Funcional	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria	
3.3.2 CPAP		5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
CPAP	Funcional	Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional
3.3.3 "+" Límites de advertencia del volumen minuto (MV)			

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó ~~completo~~ "completo". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.