

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica
HGR No. 1

N° de Orden
AB0182-C933

Fecha
3-oct.-25

COAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
C. Mantenimiento Correctivo

Modelo:	BABYTHERM 8010	No. Serie:	ARRM-0040	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0182	Inventario:	2002905889	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	CUNA DE CALOR RADIANTE	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparación por mejora, se cambia carcasa de radiador, carcasa superior de modulo, cables de sensores de temperatura, mazos de cables externo e interno y base de radiador.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3550

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	2M30739	HEAT RADIATOR 120V PT	N/A	9				
2	1	2M21957	PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA	N/A	10				
3	1	2M30308	TRONCO D.CABLES SENSOR	N/A	11				
4	1	2M30048	MAZO DE CABLES RED INTERNO	N/A	12				
5	1	2M30049	MAZO DE CABLES RED EXTERNO	N/A	13				
6	1	2M30747	TRAVERSE COMPL	N/A	14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre
Puesto
Matrícula
Fecha
Firma
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre
Fecha
Firma
Pedro Garcia Chacon
3-oct.-25

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre
Puesto
Matrícula
Fecha
Firma
Dra. Claudia C. Osuna-Saucedo
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11043296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría

Datos Biomédico


(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre
Fecha
Firma

Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal

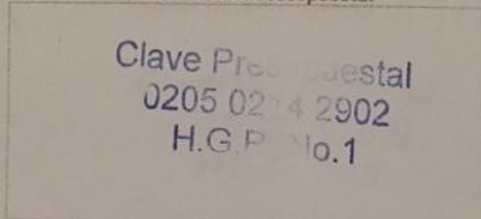

Sello Fechador



German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 2-4
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 06730, CDMX

Oficina Quadrijera
José Oued Col. Americana
Col. Amari C.P. 44140 Ousdalejara, Jal.
C.P. 44140 Ousdalejara, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Dräger

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0040

No. Orden: AB0182-C933

Con número de serie



Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello. Rellenar los datos faltantes con letra ya molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto Subjefe de Conservación
Matricula IMSS Mat 99024980
Fecha H.G.R. No. 1
Firma



Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Pedro Garcia Chacon
Fecha 3-oct.-25
Firma

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador

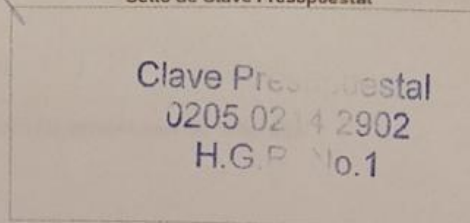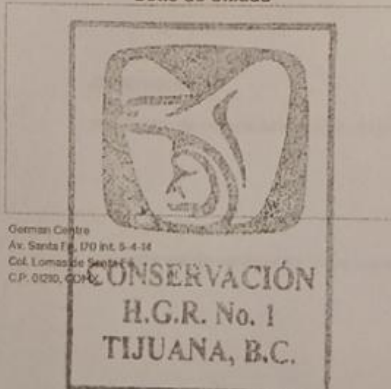

German Centre
Av. Santa Fe, Dto Int. 5-4-14
Col. Lomas de San Mateo
C.P. 02020, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amel. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0182-C933

ID Actividad de Servicio:
3FC57B05-38D7-4305-A3AC-E868C71B19DF

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
20029055889

Número de Serie:
ARRM-0040

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
03-10-2025

Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo	
1.2 Versión del software	
Versión de software (Babytherm)	1.01
3 Seguridad eléctrica	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.1 Examen visual	
Estado comprobado.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.049 Ohm
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Valor de referencia de 100 V a 127 V	189.1 µA
4 Prueba de funcionamiento y de estado	
4.1 Pruebas de estado	
4.1.1 Documentos adjuntos	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional
4.1.4 Unidad de control y de regulación	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional
4.1.7 Paneles	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional
4.1.9 Radiador	
Radiador	Funcional

Prueba	Resultado
4.1.10 Varillas de calefacción	
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
4.1.11 Placa base	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
4.2 Pruebas de funcionamiento	
4.2.1 Superficie de reposo	
El enclavamiento en distintas posiciones es posible. La superficie de reposo encaja con seguridad y sin juego.	Funcional
4.2.3 Prueba de encendido	
Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
4.2.6 Radiador	
El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
Potencia de calefacción ajustable manualmente	Funcional
Calefatar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
4.2.12 (Opción) Fototerapia	
Prueba de funcionamiento	Funcional
4.2.15 Medidas finales	
4.2.15. Entrega del aparato	
Entrega del dispositivo	Funcional
5 Medios de comprobación	
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban