

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

N° de Orden

ABO183-1841

Fecha

3-jul.-25

Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

Tipo de Mantenimiento

1er Mantenimiento Preventivo

Modelo:	BABYTHERM 8010	No. Serie:	ARRM-0049	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	ABO183	Inventario:	2002905890	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	CUNA DE CALOR RADIANTE	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación de resistencias cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia.
- Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.

Incidencias:

Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3737

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional.

* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99021980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

3-jul.-25

Firma

Datos Biomédico.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

EEB Almée Ruiz
Mat. 99028556

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIALRECORDADO
03 JUL 2025CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Operativa
José Guad. Del. Americana
Col. Amara C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0049

No. Orden: AB0183-1841

Con número de serie

Babytherm 8010
REF FR 00098/FR00105 - 17
SN ARRM -0049
V~ 120 - 127
A 15,2 Hz 50/60
Made in Germany
Dräger Medical AG & Co. KG
23548 Lübeck, Germany
CE 0123 3400 018

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales en el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Carlos Oswaldo Ramirez González

Puesto

Suplente de Conservación

Matrícula

H.G.R. No. 1

Fecha

IMSS Mat 99024980

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro García Chacon

Fecha

3-jul.-25

Firma

[Firma]


Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal



Sello Fechador

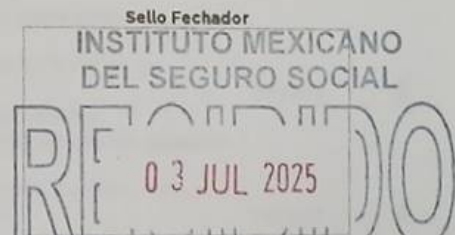

German Contrax
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0210, CDMX

Oficina Guadalupe
José Oued Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0183-1841

ID Actividad de Servicio:
98208951-09A8-4063-B74C-C6BF3487015F

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905890

Número de Serie:
ARRM-0049

Servicio Realizado por:
Pedro Garcia Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
03-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Códigos de serie			
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010			
1.1.1.1 Babytherm 8004 / 8010			
Sistema electrónico básico (2M30283 o 2M30284)	2M30283	✓	Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.
1.2 Versión del software		4.1.11 Placa base	Funcional
Versión de software (Babytherm)	1.01	✓	Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.
1.3 (Opción) Fototerapia		4.1.13 Otros accesorios	Funcional
Fototerapia (horas de funcionamiento)	384	✓	Las piezas mencionadas no están sucias ni dañadas.
3 Seguridad del sistema eléctrico		4.2 Pruebas de funcionamiento	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)		4.2.1 Superficie de reposo	Funcional
3.1.1 Examen visual		✓	Bloqueo de la superficie de reposo
Estado comprobado.	Funcional	✓	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.2.3 Prueba de encendido	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.200 Ohm	✓	Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. En el display aparece en un texto legible la indicación. Todos los indicadores encendidos, bocina encendida. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		Funcional	✓
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	✓	
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		4.2.6 Radiador	
Valor de referencia de 100 V a 127 V	18.4 µA	✓	Potencia de calentamiento ajustable manualmente
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V	18.2 µA	✓	Calentar ambos elementos de calefacción.
4 Prueba de funcionamiento y de estado		✓	El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.
4.1 Pruebas de estado		✓	Regulación de la temperatura cutánea
4.1.1 Documentos adjuntos		4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional	✓	Advertencia de fallo de la tensión de red
4.1.2 Letreros de Babytherm		4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	Funcional
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional	✓	Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna
4.1.4 Unidad de control y de regulación		4.2.9 Calefacción de colchón (Babytherm 8010)	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional	✓	Alarma +/- 1 °C de desviación del valor nominal y real
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna		✓	Ajuste del valor nominal
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional	✓	
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta		4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	Funcional
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional	✓	La superficie de reposo asciende y desciende.
4.1.7 Paneles		4.2.12 (Opción) Fototerapia	Funcional
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional	✓	Prueba de funcionamiento
4.1.9 Radiador		4.2.15 Medidas finales	
Radiador	Funcional	✓	
4.1.10 Varillas de calefacción		4.2.15.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	Funcional
		✓	Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo
		5 Medios de comprobación	
		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
		✓	Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó "Dimensional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.