

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

N° de Orden
ABI551-C933

Fecha
3-oct.-25

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
C. Mantenimiento Correctivo

Modelo:	PRIMUS	No. Serie:	ARWB-0118	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	ABI551	Inventario:	No presente	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparacion por reporte en fallo de placa calentadora, se verifican conexiones y se limpian terminales de la placa.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2946

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional
* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
1.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: IMSS Mat 99074980
Firma:

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 3-oct.-25
Firma:

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Lic. Lilia B. López Rodríguez
Puesto: SJE Mat 99022206
Matrícula: IMSS
Fecha:
Firma:

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre:
Fecha:
Firma:

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal
0205 02 14 2902
H.G.R. No. 1

RECIBIDO
03 OCT 2025

Oficina Central
Av. Santa Fe, 50 Int. 5-4-1
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0690, CDMX

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Guadalajara
José Gudiño Col. Americana
Col. Amén. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: PRIMUS

No. Serie: ARWB-0118

No. Orden: AB1551-C933


Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento

REF	8603800-25
SN	ARWB-0118
Baukasten	8602940-35
Variante	8602936-06
SW02.01.00	8605260-00
Option	



Fotos durante el Mantenimiento

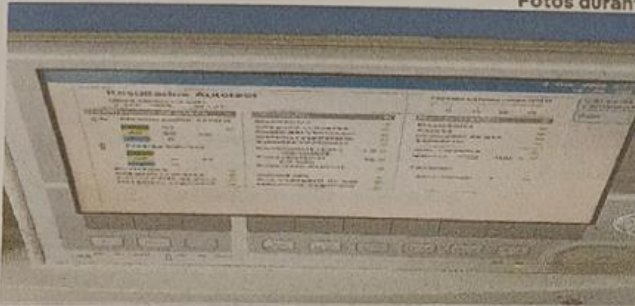

Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello de conservación, indicar los datos de conservación con sello de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto Subjefe de Conservación
Matricula IMSS Mat 99024980
Fecha
Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Pedro Garcia Chacon
Fecha 3-oct.-25
Firma

Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Sello Firmador



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB1551-C933

ID Actividad de Servicio:
AB7D49CB-79C5-4874-A39F-626ACA505C6E

Primus

Funcional

Número de Inventario:
No presenta

Número de Serie:
ARWB-0118

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacón

Localización:
Oncocreon

Servicio Realizado el día:
03-10-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Números de serie		Funcionamiento de la USV	Funcional
Tapa del sistema paciente	ASJH-0135	4.3 Versiones de software	
Placa de válvulas (sin reducción): Número de referencia	8603807	4.3.1 Versiones de software	
Placa de válvulas (sin reducción): Número de serie	ASEJ-0069	Panel de control del monitor MoBi	4.53.04
Bloque de gas respiratorio (8602804)	ARWB-0131	Mezclador Mixer MA	4.53
3 Seguridad eléctrica		Aparato de respiración VGC MA	4.53
3.1 Seguridad eléctrica según IEC 62353		Módulo de gas del paciente PGM	1.40
3.1.1 Examen visual		Fuente de alimentación power supply	2.05
Estado comprobado.	Funcional	4.10 Modos de respiración y alarmas	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.10.1 Respiración manual	
Máximo valor medido del equipo EM	0.240 Ohm	Mediante compresión de la bolsa reservorio se puede simular una ventilación manual.	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.10.2 Respiración espontánea	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	Con el pulmón de pruebas (7911140) es posible simular una respiración espontánea manual.	Funcional
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		4.10.3 Respiración controlada por presión (Pressure Mode)	
Valor medido	188.2 µA	Los valores de medición mostrados están dentro de la tolerancia.	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.10.4 Respiración controlada por volumen (modo volumen)	
4.1 Estado		Respiración controlada por volumen	Funcional
4.1.1 Documentos adjuntos		4.10.5 Alarmas acústicas y ópticas	
Los adhesivos y los documentos adjuntos están presentes.	Funcional	La alarma Respirador desconect. se muestra en la pantalla del aparato, suena un tono de advertencia y parpadea el indicador LED rojo de alarma.	Funcional
4.1.2 Carcasa, tubos, conexiones, trampa de agua		4.20 Medida final	
Carcasa, tubos flexibles, conexiones y trampa de agua	Funcional	4.20.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	
4.1.3 Sistema respiratorio		Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo	Funcional
Sistema respiratorio	Funcional	5 Medios de comprobación	
4.1.5 Sistema de acoplamiento del vaporizador y sistema AGS		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Sistema de acoplamiento del vaporizador para anestesia y sistema AGS	Funcional	Se ha utilizado equipo de ensayo con calibración vigente	Funcional
4.2 Alimentación eléctrica sin interrupción "USV"			
4.2.1 Funcionamiento de la USV			

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.