

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

N° de Orden

AB1601-2968

Fecha

7-nov.-25

Ingeniero Dräger

Janeth Estefania Enriquez Perez

Tipo de Mantenimiento

2do Mantenimiento Preventivo

Modelo:	SAVINA	No. Serie:	ASAD-0224	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB1601	Inventario:	200980004435	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	VENTILADOR VOLUMETRICO	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:

SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3247-22-2642

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado: 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	M908860	KIT MANT SAVINA 2 AÑOS	No aplica	9				
2	1	6737545	MICROFILTRO	No aplica	10				
3	1	8407998	KIT FILTRO DE POLVO	No aplica	11				
4	2	8403667	MEMBRANA COMPLETA	No aplica	12				
5	1	8420632	JUEGO DE 2 BATERIAS INTERNAS	No aplica	13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2	M	Mano de Obra
4	T	Traslado
0	E	España

Datos de Jefe de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre **Jose Derio de Conservación**

Puesto **General Regional No 1**

Matrícula **Matrícula 99024951**

Fecha **7-11-25**

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Janeth Estefania Enriquez Perez

Fecha

7-nov.-25

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre **Gutiérrez Nuñez Abraham Israel**

Puesto **Inhaloterapeuta**

Matrícula **Mat. 99022978**

Fecha **7-11-25**

Firma

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEIVED
07 NOV 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

German Centre
Av. Santa Fe, 179 int. 5-1-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 02030, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amen. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: SAVINA

No. Serie: ASAD-0224

No. Orden: ABI601-2968

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matricula

Fecha

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Janeth Estefania Enriquez Perez

7-nov.-25


Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DE SEGURO SOCIAL

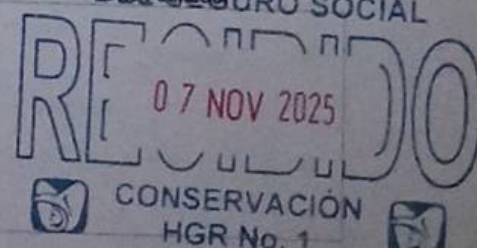

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amen. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
HGR No. 1, Tijuana, Baja California.

Número de Orden de Servicio:
AB1601-2968

ID Actividad de Servicio:
39AC7E96-F44C-4773-BB64-4413F93487E5

Savina

Funcional

Número de Inventario:
200980004435

Número de Serie:
ASAD-0224

Servicio Realizado por:
Enriquez, Janeth Estefania

Localización:
Inhaloterapia

Servicio Realizado el día:
2025-11-07

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.1.6 Cubierta del filtro	
1.1 Código de serie		Cubierta del filtro	Funcional
Válvula de espiración 1 (reutilizable)	ARZN-0657	4.1.7 Tubo de conexión de gas O2	
1.2 Datos del aparato		Tubo de conexión de gas O2	Funcional
BIPAP/PCV+ (8414060) (Si/No)	Si	4.1.8 Carro (opcional)	
1.3 Versión de software (Savina)		Carro (opcional)	Funcional
Versión de software (Savina)	3.11	4.2 Pruebas de funcionamiento	
1.4 Horas de funcionamiento		4.2.1 Válvula anti-retorno en la válvula de espiración (reutilizable)	
Total de horas de funcionamiento	4468 h	Válvula de espiración 1 (reutilizable)	Funcional
Horas de funcionamiento Servicio	569 h	4.2.2 Válvula de seguridad neumática (D1)	
1.5 Registro de los límites de alarma específicos del usuario		Válvula de seguridad neumática (D1)	109 mbar
Paw	100	4.2.3 Válvula de respiración de emergencia (D2)	
MV alto	36.7	Válvula de respiración de emergencia (D2)	-4.9 mbar
MV bajo	0.5	4.2.5 Fuente de alimentación	
TApnea	20	Indicación, alimentación eléctrica	Funcional
ftot	50	Tensión de alimentación interna (baterías internas)	Funcional
VTi	4	Advertencia de fallo de la red eléctrica	Funcional
2 Piezas de mantenimiento		4.2.7 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)	
2.2 Piezas de mantenimiento según la indicación de los intervalos		Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)	Funcional
2.2.2 Kit de servicio Savina 2 años		4.2.8 Válvula de espiración de emergencia (V8/V9)	
Kit de servicio Savina 2 años	2025-11-07	válvula de espiración de emergencia (V8/V9)	2 mbar
3 Seguridad eléctrica		4.4 Comprobación final dinámica durante el funcionamiento	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353, YY/T 0841)		4.4.1 Comprobación final dinámica	
3.1.1 Examen visual		comprobación final dinámica	Funcional
Examen visual	Funcional	4.5 Límites de alarma específicos del usuario	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.5.1 Introducción de los límites de alarma específicos del usuario	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.111 Ohm	Introducción de los límites de alarma específicos del usuario	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.6 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (2)	
Puntos de medición explorados	Funcional	4.6.1 Prueba de plausibilidad	
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		Prueba de plausibilidad	Funcional
Valor medido	241 µA	4.7 Medida final	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.7.1 Entrega del aparato	
4.1 Pruebas de estado		Entrega del dispositivo y aviso al operador (baterías)	Funcional
4.1.3 Placas identificativas y letrero de opciones		5 Medios de comprobación	
Placas identificativas y letrero de opciones	Funcional	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
4.1.4 Etiquetas de producto		Se utilizó equipo de ensayo válidamente calibrado	Funcional
Etiquetas del producto	Funcional		
4.1.5 Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)			
Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)	Funcional		

Observaciones

Modelo				tono de alarma y el del sonido de respiración se pueden modificar.		
4.5.4 Respiración controlada por volumen (modo volumen)				4.10 Tipo de gas		
Respiración controlada por volumen	Funcional	✓		4.10.1 Comprobación de gases por tipo del sistema de suministro central		
4.5.5 Función interlock de los vaporizadores para anestesia				Comprobación de gases por tipo (sistema de suministro central)	Funcional	✓
Solo se puede poner en funcionamiento un vaporizador para anestesia cada vez	Funcional	✓		4.11 Medida final		
4.5.6 Alarmas acústicas y ópticas				4.11.1 Entrega del aparato	Funcional	✓
En la pantalla del aparato se indica la alarma Respirador desconectado. Suena un tono de alarma y el indicador LED rojo de alarma parpadea.	Funcional	✓		5 Medios de comprobación		
4.5.7 Brillo de la pantalla, volumen acústico del tono de alarma y del sonido de respiración				5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria		
El brillo de la pantalla, el volumen acústico del	Funcional	✓		Se ha utilizado equipo de ensayo con calibración vigente	Funcional	✓

Observaciones

Herramienta utilizada:

- Analizador de Seguridad Eléctrica ESA612 N/S: 6896043. Próxima Calibración: 16/05/2026.
- Analizador de Flujo de Gases VT650 N/S: 6896716. Próxima Calibración: 16/05/2026.

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.