

ORDEN DE SERVICIO



Servicio realizado por:

Ing. Fernanda Diego

Fecha:

07-Mayo-2025

Folio:

ISMM25-021

Tipo de servicio:

Mantenimiento preventivo

Condición de contrato:

Garantía

Equipo: Monitor de Signos Vitales (de terapia intensiva neonatal)

Número de serie:

DE7770E7TA

Marca: Philips

Modelo:

Intellivue MX550

Unidad Médica

HGR 1 Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Falla reportada

Mantenimiento preventivo

Actividades del servicio

Fecha servicio:

07-Mayo-2025

Inicio de servicio:

10:30

Término de servicio:

12:30

Solución

Se presenta personal de ISM a realizar mantenimiento preventivo correspondiente al primer periodo. Se hace revisión física de equipo y accesorios se realizan pruebas de funcionamiento con simulador para PPMI, SPO2 y pruebas de seguridad eléctrica.

Catálogo

Descripción

Cantidad

Nombre, firma, matrícula, cargo

Sello de la Unidad

Personal de servicio

Ing. Fernanda Diego

Usuario

99028572

Conservación o Biomédica

Administración o Dirección

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

4980



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Comentarios y sugerencias

Equipo funcionando correctamente y sus accesorios.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
08 MAY 2025



CONSERVACIÓN

HGR No. 1



Folio de OS: JSMM 25-021

Fecha: 07-Mayo-2025

Nº de serie del Monitor: DE 7770E 7TA

Nº de serie del Módulo Multiparamétrico: DE 31463031



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Objetivo: Ejecutar el protocolo de mantenimiento preventivo del equipo correctamente, a fin de conservar los componentes mecánicos y electrónicos en óptimas condiciones durante el tiempo que se encuentre en uso, previniendo en lo posible, futuras fallas que provoquen el daño permanente de componentes, consumos extraordinarios de refacciones y accesorios, así como, el consumo de periodos largos para la realización del mantenimiento correctivo correspondiente.

Metodología: Realizar sistemática y puntualmente todas las actividades de revisión, limpieza, calibración, reemplazo y verificación que indica el protocolo. Revisar predictiva y meticulosamente cada elemento y módulo del equipo, efectuando en el momento las reparaciones que se requieran y programando los reemplazos adicionales al protocolo que prevengan fallas posteriores.

ABREVIATURAS Y SIMBOLOGIAS:

OK: En correcto estado, hecho. FC: Frecuencia cardiaca. FR: Frecuencia respiratoria. SpO₂: Saturación de oxígeno capilar periférica. PANI: Presión arterial no invasiva. PAI: Presión arterial invasiva.

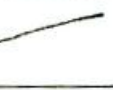
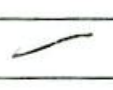
1	INICIO	Registro
1.1	Lea todo el protocolo antes de comenzar.	/
1.2	Consulte con el usuario el desempeño del Instrumento.	/
1.3	Verifique que el espacio de funcionamiento sea el correcto así como las condiciones ambientales de operación, ajustar el medio según sea necesario.	/
1.4	En caso de aplicar, verificar la conexión a la central de monitoreo.	/
1.5	Verifique el correcto suministro de voltaje al equipo. Registre voltaje: <i>220V</i>	<i>N/A</i>

2	MEDIDAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	Registro
2.1	Uso de bata, guantes y en caso necesario, cubre bocas.	/
2.2	Descontaminar el instrumento, módulo y accesorios.	/

3	VERIFICACIÓN INICIAL DEL EQUIPO (En caso de requerir algún reemplazo, realizar la observación y programar el cambio)	Registro
3.1	Verifique la estabilidad del instrumento en la base o soporte.	/
3.2	Verifique la integridad del cable de alimentación CA.	/
3.3	Verifique la integridad del troncal de ECG.	/
3.4	Verifique la integridad de los latiguillos del ECG.	/
3.5	Verifique la integridad del dedal.	/
3.6	Verifique la integridad del troncal del dedal.	/
3.7	Verifique la integridad del sensor de temperatura.	/
3.8	Verifique la integridad del brazalete para la PANI	/
3.9	Verifique la integridad de la manguera para la PANI	/
3.10	Verifique la integridad de troncal para la PAI.	/
3.11	Verifique la integridad de sensor para la PAI.	/
3.12	Verifique la integridad del termistor para gasto cardiaco.	/

4	VERIFICACIÓN AL ENCENDER EL EQUIPO	Registro
4.1	Conexión a corriente.	/
4.2	Reconocimiento del módulo multiparamétrico.	/
4.3	Visualización de línea basal en ECG.	/

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5	VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS	Registro
5.1	Prueba para ECG	
5.1.1	Señal sinusoidal con FC de 100 lpm. Resultado: 100 lpm Tolerancia: ± 2 lpm	
5.2	Prueba de frecuencia respiratoria	
5.2.1	FR de 40 rpm. Resultado: Tolerancia: ± 2 rpm.	
5.3	Prueba para PANI (Realizar calibración en caso de ser necesario)	
5.3.1	Ajustar PANI a: 70/40 (70 mmHg). Resultado: 67/42 (57) Tolerancia: ± 5 mmHg.	
5.3.2	Ajustar PANI a: 120/80 (90 mmHg). Resultado: 120/84 Tolerancia: ± 5 mmHg.	
5.3.3	Ajustar PANI a: 190/120 (108 mmHg). Resultado: Tolerancia: ± 5 mmHg.	N/A
5.3.4	Test de válvula de seguridad Resultado:	
5.4	Prueba de SpO₂	
5.4.1	Simulador con un valor de SpO ₂ de 97% Resultado: 98% Tolerancia: $\pm 2\%$	
5.5	Prueba de temperatura	
5.5.1	Prueba de temperatura a 37°C Tolerancia: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ Resultado:	
5.6	Prueba para PAI	
5.6.1	Ajuste a 0 mmHg	
5.6.2	Simulador con una presión de 200 mmHg. Resultado: Tolerancia: ± 5 mmHg y despliegue de onda.	N/A

6	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MONITOR Clase II Tipo CF	Registro
6.1	Resistencia a tierra máx. Tol. $\leq 300\text{m}\Omega$	70 m Ω
6.2	Corriente de fuga del equipo máx. Tol. $\leq 300\mu\text{A}$	0 μA
6.3	Corriente de fuga al paciente máx. Tol. $\leq 100\mu\text{A}$	

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mant 09/07/2008

7. PRUEBAS DE FUGAS DEL CHASIS				
7.1	Tierra	Neutral	Polaridad normal (NP)	Polaridad Invertida (RP)
7.2	Cerrada	Cerrada	0 μ A	0 μ A
7.3	Abierta	Cerrada	69 μ A	63 μ A
7.4	Cerrada	Abierta	0 μ A	0 μ A
7.5	Abierta	Abierta	126 μ A	126 μ A

8. PRUEBAS DE FUGAS PUESTA A TIERRA				
8.1	Tierra	Neutral	Polaridad normal (NP)	Polaridad Invertida (RP)
8.2	Cerrada	Cerrada	3 μ A	3 μ A
8.3	Abierta	Cerrada	3 μ A	4 μ A
8.4	Cerrada	Abierta	2 μ A	3 μ A
8.5	Abierta	Abierta	3 μ A	3 μ A

Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez
 Sub jefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS 00074980

Nombre y firma
 Cliente

Fernando Diego
 Nombre y firma
 servicio ISM

INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 08 MAY 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1