

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
RP1365.12

15220204

WO-16645346

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	704
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TUJANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573
		Serie GE:	

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	10-jun-25	12:00	10-jun-25	14:00
Reparación	13-jun-25	11:30	13-jun-25	18:00
Fin del servicio: 13 de junio de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Equipo no realiza exploración, se realiza diagnóstico encontrando corto circuito en el generador, lo cual es el origen de daño de fusibles en el PDU y capacitores. Se realiza reemplazo de generador, calibración de filamento y pruebas de funcionamiento con fantoma.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5193755

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2450071

SINTOMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO


HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
19/09/2025	18-335957-0000	CT SERVICE HOIST
28/06/2025	62590040	Digital multimeter

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Si ✓
Sí ✓

Observaciones

Equipo funcionando correctamente

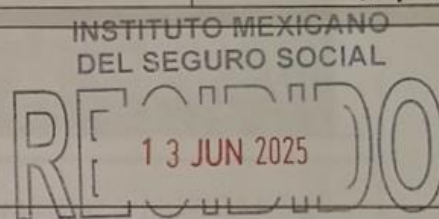

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción
3	5324766	100A fuse
2	5324753	CAPACITOR, 6UF, 370VAC PM FILTER
1	2401826-8	JEDI 60DC for PERENNA POWER UNIT-HV TANK ASSY FRU for 2371333-6 -SoC Option

No. Orden / No. de GON
107523242
107523242
107523242

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1
TUJANA, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Andrés Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefe de Radiología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024403

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable


Sello Clave Presupuestal
Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Nombre completo

Cargo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Jefe de Radiología
Mat. 99024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>

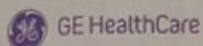

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
RP1365.12

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15220204

WO-16645346

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

SID GE:	664BRG1318573
Equipo:	TOMOGRAFO
Modelo:	BRIGHTSPEED
Serie:	664BRG1318573

A
N
S
T
E
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
U
É
S
I
C
D
I
O
L



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
FOTOGRAFÍA DE LA ETIQUETA
13 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Observaciones

Dra. Alejandra Lucero Martínez Olvera
Médica Radióloga
Firma y sello de Conformidad
IMSS
Mat. 980,4465

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Roberto Pacheco
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Suplente de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 990,4980
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>