

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 COMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
RP1765.13

1528494

WO-16737356

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	704
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRAFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	17-jun-25	13:00	17-jun-25	18:00

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2450071

SINTOMA
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fin del servicio:	17 de junio de 2025
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO	

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio. Se realiza verificación de slip ring. Se realiza verificación de brush tips y brush block. Se realiza verificación pruebas de funcionamiento de paros de emergencia. Se realiza prueba de funcionamiento de panel de operador en gantry. Se realiza revisión de cable de alto voltaje. Se realiza goodbye scan


HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		No Aplica

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5193755

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

Equipo funcional

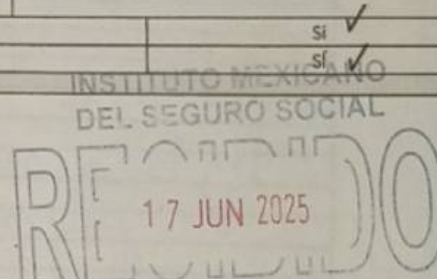

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	
	Descripción	
	No Aplica	

Sello de Unidad
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello Clave Presupuestal [Sustal]
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Roberto Pacheco

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465
Cargo

Matrícula


Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
Cargo

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

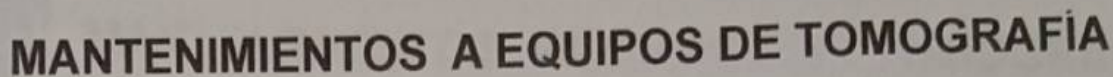

Sala: Tomografia

Modelo: Brightspeed

Mantenimiento: 1er mantenimiento preventivo

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Valor:

Forma:

Phantom agua/aire
Phantom de agua
Phantom agua/35cm/42cm
Phantom agua
Phantom de QA/Agua
Phantom de agua
Phantom de QA
Phantom de QA
Comparación visual
Medir mesa con flexómetro
Coincidencia del Haz con el Punto

Software

En Rango:

Agua

Aire

Si	☒	No	☐	05.71 / -999.50
Si	☒	No	☐	00.61 / -948.70
Si	☒	No	☐	00.73 / -999.30
Si	☒	No	☐	00.70 / -998.90
Si	☒	No	☐	00.71 / -999.90
Si	☒	No	☐	00.58 / -999.40
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	
Si	☒	No	☐	

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

7 JUN 2025

Si	No	N/A	Observaciones
----	----	-----	---------------

1. Limpieza del mylar
2. Limpieza de cubiertas del gantry
3. Verificación de luces de alineación
4. Verificación de anclaje / aislamiento del gantry
5. Engrasado de baleros
6. Verificación de tensión de bandas
7. Inspección y limpieza de anillos (slip ring)
8. Inspección y limpieza de escobillas
9. Inspección del transmisor / receptor (antena) de RF
10. Torque de componentes del gantry

[illegible]

Observaciones



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Si	No	N/A	Observaciones
----	----	-----	---------------

1. Limpieza y verificación del detector
2. Verificación del funcionamiento de ventiladores
3. Limpieza de filtros

SI	No	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐



MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE TOMOGRAFIA

Generador de RX

1. Verificación / Limpieza de ventiladores del radiador
2. Cambio de aceite de alta tensión en terminales de tubo
3. Cambio de aceite de alta tensión en terminales de tanques
4. Verificación de Kv y de mA
5. Inspección de cables de alta tensión
6. Torque de tornillos y tuercas en sistema de RX

SI No N/A Observaciones

☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐

Mesa de paciente

1. Verificación / Limpieza de cubiertas
2. Verificación / Limpieza de rieles
3. Verificación de que no existan fugas de aceite
4. Verificación de anclajes / Aislamiento de la mesa
5. Verificación de la función de liberación de la mesa

SI No N/A Observaciones

☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐

Consola de operador

1. Verificación de ventiladores
2. Limpieza de filtros de aire
3. Verificación de la operación correcta del Mouse
4. Limpieza de monitores / exterior de la consola
5. Verificación de cables / Terminales de cables de poder
6. Verificación de funciones de audio

SI No N/A Observaciones

☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐

Sistema

1. Verificación de paros de emergencia (Gantry / Consola / PDU)
2. Verificación de luz de aviso
3. Operación del botón de abortar estudio
4. Verificación de etiquetas de advertencia
5. Verificación de archivos de errores
6. Comunicación HIS/RIS
7. Comunicación PACS
8. Comunicación AW

SI No N/A Observaciones

☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐

Clave Presupues
0205 0214 290.
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
17 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Unidad de distribución de poder (PDU)

1. Verificación de terminales de cables
2. Verificación voltaje de alimentación

SI No N/A Observaciones

☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐

Comentarios:

Equipo funcional. Equipo operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.


Roberto Pacheco

Nombre y firma
Ing. de G. E.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

Nombre y firma
Cliente

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Radiología HGR1
Fed. Esp. 11980592
Mat. 9824465

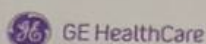

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: lmss@gehealthcare.com



Reporte fotográfico
RP1765.13
No. De Orden
No. de caso 15286494
No. de WO WO-16737356

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00


Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAOB / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: 664BRG1318573
Equipo: TOMOGRAFO
Modelo: BRIGHTSPEED
Serie: 664BRG1318573

AN
TE
R
V
I
D
C
E
I
L
O

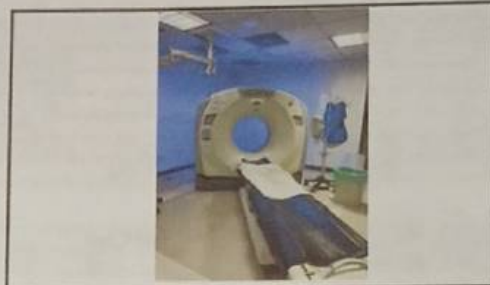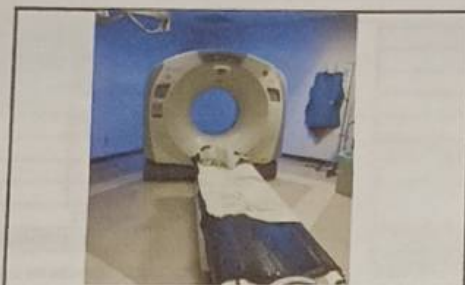

D
U
R
A
N
T
E
E
L

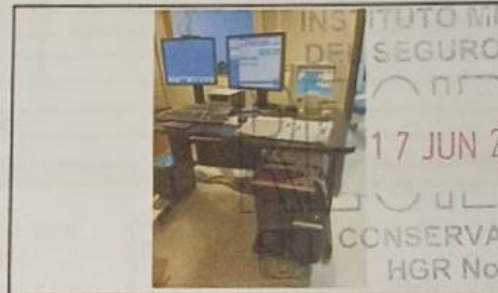

D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Clave Presupuesta:
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

CONSERVACIÓN
I.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Roberto Pacheco
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjeto de Conservación
I.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://ecso.gehealthcare.com/>

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Radiología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

