

Hoja de servicio
MAM2175.5

No. de folio

15301877


No. de caso

WO-16760728

No. de WO

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

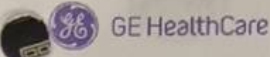

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	20
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	AVANCE C52
Localidad:	Tijuana	Serie:	APKV01987
		SID GE:	APKV01987

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	21-jul-25	5:00	21-jul-25	7:00
Fin del servicio:	21 de julio de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443792

SINTOMA
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: **M1222131**

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: ☒ No ☐

Reprogramación del Servicio:
No Aplica



Condiciones en que se deja el equipo: **FUNCIONANDO**

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	
1	1009-5800-000	Batería de reloj	
1	4873474-S	Baterías de respaldo	
1	0211-1454-100	Valvula check	
1	1102-3016-000	Orings del puerto de vaporizador	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Dr. Carlos Arzate Ontiveros
Mat. 99277559
Ced. Profesional 3758613
Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Osvaldo Ramírez González
Nombre completo
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo: AVANCE CS2
Serie: APKV01987
SW Ver:

Caso: 15301877
WO: WO-16760728

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Instalación
Preventivo



Inspección visual

Montaje/ ajuste partes móviles
Filtros
Cable AC
Ruedas y carcasa
Sistema ABS y de desecho

Pasa	N/A	Falla
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○

Pruebas de pantalla

LEDs
Bocina
Batería
Teclado
LCD / pantalla táctil

Pasa	N/A	Falla
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○

Pruebas funcionales

Configuraciones y hora
Secuencia de encendido
Pruebas cilindros de gas
Alarma de O2 bajo
Válvula MOPV
Prueba presión lím de circuito
Pruebas de mixer
Pruebas Flujoímetro O2 Alt
Pruebas Flujoímetro O2 Aux
Pruebas regulador de succión
Contrapresión/Bloqueo Vap.
Pruebas válvula flush
Prueba de flujos ($\pm 10\%$ ml/min)
Comprobación inicial
Fugas de baja presión
Alarmas de sistema
Alarma fallo de AC
Válvula APL
Vaporizadores

Pasa	N/A	Falla
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○

Calibraciones de ventilador

Flujo y Presión
Celda de O2 (21% y 100%)
Reg Gas motriz $172 \pm 10\%$ kPa
Cal. "Manifold P Span"
Cal. Válvula flujo inspiratorio
Cal. "Bleed Resistor"
Cal. "Bleed Resistor"
Cal. "Zero Gas Transducers"
Cal. "Mixer P Zero"
Log de errores
Válvula liberación (< 10 cmH2O)
Cal. Módulo respiratorio
Modelo / NS:

Pasa	N/A	Falla
✓	○	○
○	✓	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○

Limpieza

Pasa	N/A	Falla
✓	○	○

Reemplazo de partes

Frecuencia MP ANUAL
1102-3016-000 Vap port orings
0211-1454-100 Vlv respiración libre
1503-3208-000 Vlv Resp libre oring
1009-5800-000 Batería display
1011-3557-000 Batería del sistema

Aplica	N/A	Reemp
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
✓	○	○
○	✓	○

Pruebas de Seguridad Eléctrica

Resistencia a tierra < 0.2 ohms
Corriente de fuga < 300 μ A

Pasa	N/A	Falla
✓	○	○
0.1		
167		

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	ESA 612	5989068	03 Oct 2025

Comentarios:

FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Ing. Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y Firma


Dr. Carlos Arzate Ontiveros

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramirez González
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Responsable
Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

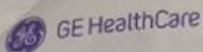

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
MAM2175.5
No. De Orden
No. de caso 15301877
No. de WO WO-16760728



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: APKV01987
Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo: AVANCE CS2
Serie: APKV01987




A
N
T
E
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L

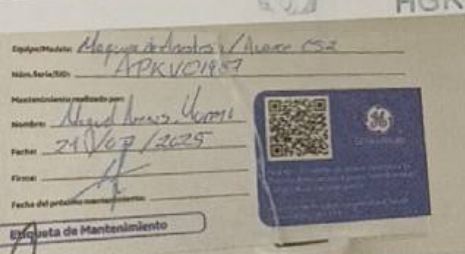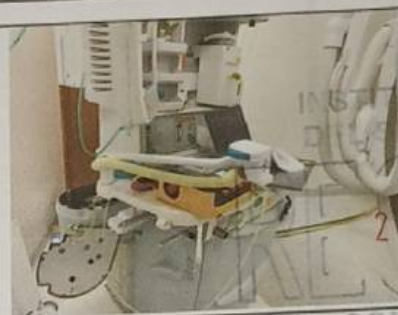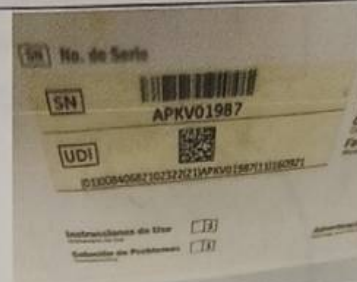

Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Cargo
Dr. Carlos A. Ontiveros
Mat. 99277359
Cod. Profesional 3758613
Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargo
Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez
Sub Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matricula
IMSS Mat. 9924980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



GE HealthCare

Fecha:

21-jul-25

Rutina de Mantenimiento Preventivo

Contraportada del la bitácora del equipo

Datos del Proveedor:

GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
ANTONIO DOVALI JAIME No 70 TORRE B PISO 4 COL. SANTA FE
DEL. ALVARO OBREGON CP 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL
Tel. 800 2000 111

No. De Contrato: 050GYR019N09125-011-00

No. De Proveedor: 35981

Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA

Marca: GE HEALTHCARE

1. Inspección del sistema visual
2. Cables limpios
3. Brazo sujeto correctamente
4. Prueba de comprobación completa
5. Presión de toma mural O₂ (40-80 PSI)
6. Presión de toma mural Aire (40-80 PSI)
7. Pruebas en cilindro de gas
8. Flush de oxígeno
9. Sistema nebulización conectado
10. Lentes alineadas y al mismo nivel
11. Frenos de inmovilización de Sargas
12. Indicador de corriente CA encendido
13. Soporte de batería
14. Luz de superficie trabajo
15. Limpieza de filtro de ventilador
16. Bypass de vaporizadores
17. Limpieza de filtro encima de entrada de AC
18. Revisión y limpieza de ABS
19. Desensamblaje de componentes, sin flujos, manchas
20. Desinfección de sistema respiratorio
21. Mantenimiento del sistema Evacuación gases
22. Ensamble del fuelle. Fuelle no deslinda en posición normal e invertida
23. Revisión de estado de sensores de flujo
24. Verificación de operación de switches electrónicos y neumáticos
25. Revisar historial de errores y alarmas
26. Pruebas y recalibraciones del Ventilador
27. Calibración del sensor O₂ (21%, 100%)
28. Calibración a cero flujo y presión
29. Prueba en válvula HCPV
30. Prueba presión límite
31. Calibración manifiesto
32. Calibración válvula inspiratoria
33. Calibración de presión en vías aéreas
34. Ajuste a cero en transductores
35. Ajuste a cero de mezclador
36. Pruebas en pantalla
37. Pruebas en LEDs
38. Prueba en LCD
39. Pruebas en batería
40. Pruebas en teclas
41. Prueba en LCD
42. Calibración de pantalla tactil
43. Pruebas de liberación de presión
44. Válvula liberadora de presión
45. Pruebas de presión trasera de vaporizador
46. Pruebas en mezclador electrónico
47. Prueba de fugas de la válvula salida del mezclador
48. Verificación del mezclador:
 49. 100% O₂ a 10 l/min
 50. 100% Aire a 10 l/min
 51. 100% N₂O a 10 l/min
 52. 100% N₂O a 0.5 l/min
 53. 100% Aire a 0.5 l/min
 54. 100% O₂ a 0.5 l/min
 55. Flujo alternativo O₂
49. Presión los siguientes flujos:
 57. 1 l/min
 58. 5 l/min
 59. 5 l/min
 60. 10 l/min
 61. Flujo máximo
62. Prueba del flujómetro auxiliar
63. Ajuste Flujo O₂ al mínimo
64. Ajuste Flujo a 1 l/min
65. Ajuste Flujo a 3 l/min
66. Ajuste Flujo a 5 l/min
67. Ajuste Flujo a 10 l/min
68. Ajuste Flujo a Máximo
69. Calibración de módulo de gases
70. Ajuste Flujo CO₂ a 5.0 %
71. Ajuste Flujo O₂ a 54.5 %
72. Ajuste Flujo N₂O a 36 %
73. Ajuste Flujo AA/O₂ a 2.0 %
74. Prueba de ventilación
75. Ajuste VT 400 ml FR 12 y PEEP a 5
76. Flujo a 0.5 l/min
77. Flujo a 5 l/min
78. PEEP
79. PVA
80. Pruebas de alarmas
81. Alarma de FIO₂ bajo en 50%
82. Alarma de FIO₂ alto en 50%
83. Alarma baja de VM A6 l/min
84. Fílmil menor que presión zilo
85. Remueva el pulmón de prueba
86. Cuelga circuito ventilación manual API, A70
87. Retire cable de alimentación
88. Reinstale cable de alimentación
89. Prueba de comprobación completa
90. Ventilador y gas (Fuga <250 ml)
91. Prueba de fugas circuito (<250 ml)
92. Prueba de fugas baja presión
93. Pruebas de seguridad eléctrica
94. Resistencia a tierra <0.2 ohms
95. Resistencia a tierra <0.2 ohms

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V. por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>