

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS



GE Healthcare

Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA

Caso: 15301878

Modelo: AVANCE CS2

WO: WO-16760729

Serie: APKV01988

SW Ver:

Instalación
Preventivo

Inspección visual

Montaje/ ajuste partes móviles
Filtros
Cable AC
Ruedas y carcasa
Sistema ABS y de desecho

Pasa	N/A	Falla
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø

Pruebas de pantalla

LEDs
Bocina
Batería
Teclado
LCD / pantalla táctil

Pasa	N/A	Falla
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø

Pruebas funcionales

Configuraciones y hora
Secuencia de encendido
Pruebas cilindros de gas
Alarma de O2 bajo
Válvula MOPV
Prueba presión lím de circuito
Pruebas de mixer
Pruebas Flujoímetro O2 Alt
Pruebas Flujoímetro O2 Aux
Pruebas regulador de succión
Contrapresión/Bloqueo Vap.
Pruebas válvula flush
Prueba de flujos ($\pm 10\%$ ml/min)
Comprobación inicial
Fugas de baja presión
Alarmas de sistema
Alarma fallo de AC
Válvula APL
Vaporizadores

Pasa	N/A	Falla
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø

Calibraciones de ventilador

Flujo y Presión
Celda de O2 (21% y 100%)
Reg Gas motriz $172 \pm 10\%$ kPa
Cal. "Manifold P Span"
Cal. Válvula flujo inspiratorio
Cal. "Bleed Resistor"
Cal. "Bleed Resistor"
Cal. "Zero Gas Transducers"
Cal. "Mixer P Zero"
Log de errores
Válvula liberación (< 10 cmH2O)
Cal. Módulo respiratorio
Modelo / NS:
Limpieza

Pasa	N/A	Falla
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø

Reemplazo de partes

Frecuencia MP ANUAL
1102-3016-000 Vap port orings
0211-1454-100 Vlv respiración libre
1503-3208-000 Vlv Resp libre oring
1009-5800-000 Batería display
1011-3557-000 Batería del sistema

Aplica	N/A	Reemp
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø

Pruebas de Seguridad Eléctrica

Resistencia a tierra < 0.2 ohms
Corriente de fuga < 300 μ A

Pasa	N/A	Falla
Ø	Ø	Ø
0.1		
76		

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	ESA 612	5989068	03 Oct 2025

Comentarios:

FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Dr. Regelio Marruquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat 11532416
Hospital General Regional
No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980


Ing. Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y Firma

Responsable
Nombre y Firma

Responsable
Nombre y Firma

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

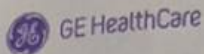

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2275.33

No. de caso

15301878

No. de WO

WO-16760729



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE:	APKV01988
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo:	AVANCE CS2
Serie:	APKV01988

A
N
T
E
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
R
É
V
I
C
I
D
I
O



Clave Presupuestal
Observaciones
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

22 JUL 2025

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Nombre completo
Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 0532416
Hospital General Regional
No. 1
Matrícula

Carlos Hernández Ramírez González
Subjeto de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 9024980
Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

Fecha:

22-jul-25

Rutina de Mantenimiento Preventivo

Contraportada del la bitácora del equipo

Datos del Proveedor:

GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
ANTONIO DOVALI JAIME N° 70 TORRE B PISO 4 COL. SANTA FE
DEL. ALVARO OBREGON CP 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL
Tel: 800 2000 111

No. De Contrato: 050GYR019N09125-011-00

No. De Proveedor: 35981

Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA

Marca: GE HEALTHCARE

1. Inspección del sistema visual
2. Cubiertas limpias
3. Brazos sujetos convenientemente
4. Prueba de compensación completa
5. Presión de toma manual O₂ (40-60 PSI)
6. Presión de toma manual Aire (40-60 PSI)
7. Pruebas en cilindros de gas
8. Flujo de oxígeno
9. Sistema evacuación conectado
10. Límites etílicos y al mismo nivel
11. Freno de inmovilización de lentes
12. Indicador de corriente (A ambiente)
13. Soporte de batería
14. Luz de superficie trabajo
15. Limpieza de filtro de ventilador
16. Bloqueo de ventiladores
17. Limpieza de filtro encima de entrada de AC
18. Resúmenes y limpieza de A&S
19. Desmontaje de componentes, Sin fluoros, manijas
20. Desinfección de sistema respiratorio
21. Mantenimiento del Sistema Evacuación gases
22. Ensamble del fuelle. Fuelle no deslinda en posición normal e invertida
23. Repetir de estado de sensores de flujo
24. Verificación de supervisión de switches electrónicos y neumáticos
25. Reajuste hipotálamo de errores y alarmas
26. Pruebas y calibraciones del Ventilador
27. Calibración del sensor O₂ (21%, 100%)
28. Calibración a cero flujo y presión
29. Prueba en válvula NGDP
30. Prueba presión límite
31. Calibración manifiesto
32. Calibración válvula inspiratoria
33. Calibración de presión en vías aéreas
34. Ajuste a cero en transductores
35. Ajuste a cero de manómetro
36. Pruebas en pantalla
37. Prueba en LED's
38. Prueba en batería
39. Prueba en batería
40. Prueba en teclado
41. Prueba en LCD
42. Calibración de pantalla táctil
43. Pruebas de liberación de presión
44. Válvula liberadora de presión
45. Prueba de presión trampa de vaporizador
46. Pruebas en manómetro electrónico
47. Prueba de fugas de la válvula salida del mezclador
48. Verificación del mezclador:
 49. 100% O₂ a 10 l/min
 50. 100% Aire a 10 l/min
 51. 100% N₂O a 10 l/min
 52. 100% N₂O a 0.5 l/min
 53. 100% Aire a 0.5 l/min
 54. 100% O₂ a 0.5 l/min
 55. Flujo alternativo O₂
56. Presión los siguientes flujos:
 57. 1 l/min
 58. 3 l/min
 59. 5 l/min
 60. 10 l/min
61. Flujo máximo
62. Prueba del flujo mínimo auxiliar
 63. Ajuste flujo O₂ al mínimo
 64. Ajuste flujo a 1 l/min
 65. Ajuste flujo a 3 l/min
 66. Ajuste flujo a 5 l/min
 67. Ajuste flujo a 10 l/min
 68. Ajuste flujo a Máximo
69. Calibración de módulo de gases
 70. Ajuste flujo CO₂ a 5.0 %
 71. Ajuste flujo O₂ a 54.3 %
 72. Ajuste flujo N₂O a 3.0 %
 73. Ajuste flujo AA/O₂ a 2.0 %
74. Prueba de ventilación
75. Ajuste VT 400 ml FR 12 y PEEP a 5
 76. Flujo a 5 l/min
 77. Flujo a 5 l/min
 78. PEEP
 79. PVA
80. Pruebas de alarmas
 81. Alarma de FIO₂ bajo en SON
 82. Alarma de FIO₂ alto en SON
 83. Alarma Baja de VME AE l/min
 84. Filtró mini con presión pico
 85. Remueva el plúmb de prueba
86. Códice circuito ventilación manual AP, APO
 87. Retire cable de alimentación
 88. Reinserte cable de alimentación
89. Prueba de comprobación completa
90. Ventilador y gas (Flujo <250 ml)
91. Prueba de fugas circuito (Flujo <250 ml)
92. Prueba de fugas baja presión
93. Pruebas de seguridad eléctrica
94. Resistencia a tierra <0.2 ohms
95. Resistencia a tierra <0.2 ohms

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contacta GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V. por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>