

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imos@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

DMGD2975.11

15308896

WO-16768445

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	731
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290042HA
		SID GE:	SNT20290042HA

Período de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	29-Jul-25	11:00	29-Jul-25	13:00
Fin del servicio:	29 de julio de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2088566-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Descripción

No Aplica

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN

Daniela Miroslava García Díaz

Nombre completo

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Nombre completo

EJP Consuelo Orduño Voz

Mat. 98020055

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15308896

WO-16768445

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290042HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290042HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

AN
T
E
R
V
I
D
E
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
É
V
I
C
I
O



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Daniela Miroslava García Díaz

Nombre completo

[Signature]

Ingeniero de Servicio

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo

[Signature]

CEJP Consuelo Orduño Vega
 Mat. 98020055

Matrícula


Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>

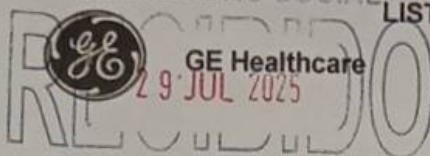

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Instalación Preventiva CONSERVACIÓN HGR No. 1

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Caso: 15308896

Modelo: Carescape B450

WO: WO-16768445

Serie: SNT20290042HA

SW Ver: v3

Inspección visual

	Falla	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Carcaza y pantalla	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado	Ø	Ø	Ø
Alarma audible (bocina)	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.17	< 0.2
μA	μA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	116	<300
Pol Norm, N abierto	191	<1000
Pol Rev, N abierto	171	<1000
Pol Rev	113	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	97	<100
Pol Norm, N abierto	113	<300
Pol Norm, G abierta	116	<300
Pol Rev, G abierta	144	<300
Pol Rev, N abierto	121	<300
Pol Rev	95	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.2	<10
Pol Norm, N abierto	0.3	<50
Pol Norm, G abierta	0.5	<50
Pol Rev, G abierta	0.1	<50
Pol Rev, N abierto	0.6	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	12	<50
Pol Rev	14	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp.
CPU Battery		0	0	0

Equipo/herramienta de medición utilizado				
Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	18/10/2025

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero
Nombre y Firma

Re
Non

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservacion
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Responsable
Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1