


uestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>

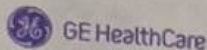

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: mxss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
DMGD2875.17

No. de caso

15308905

No. de WO


WO-16768454

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290015HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290015HA


A
N
T
E
R
V
I
D
C
I
O

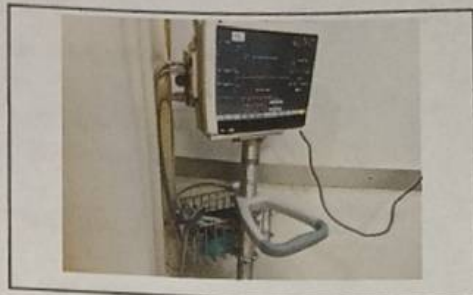

D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
I
C
D
E
O

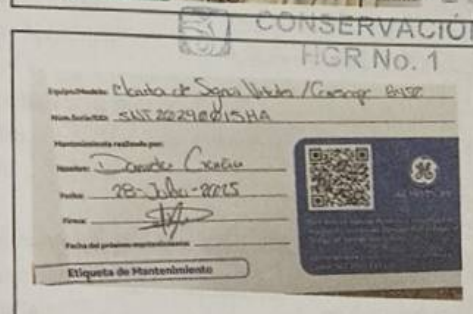

Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Daniela Miroslava García Díaz
Nombre completo

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Consejero Ordullo Vega
Mat. 98020055

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>





GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: Carescape B450

Serie: SNT20290015HA

SW Ver: V3

Caso: 15308905

WO: WO-16768454

Instalación
Preventivo

Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Carcasa y pantalla	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado	Ø	Ø	Ø
Alarma audible (bocina)	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.16	< 0.2
µA	µA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	114	<300
Pol Norm, N abierto	195	<1000
Pol Rev, N abierto	171	<1000
Pol Rev	114	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	92	<100
Pol Norm, N abierto	116	<300
Pol Norm, G abierta	117	<300
Pol Rev, G abierta	144	<300

Pol Rev, N abierto

Pol Rev

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.1	<10
Pol Norm, N abierto	0.4	<50
Pol Norm, G abierta	0.2	<50
Pol Rev, G abierta	0.3	<50
Pol Rev, N abierto		<10
Pol Rev		

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	12	<50
Pol Rev	16	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
CPU Battery		Ø	Ø	Ø

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero
Nombre y FirmaResponsable
Nombre y Firma

Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1