



No. De Folio
No. de CASE
No. de WO

Hoja de servicio
MA2885.11
13450848
WO-16992124

Razon Social:	HGR No. 1	SID:	SM624330014MD
Ciudad / Localidad:	TIJUANA	Cons.	
OOAD/UMAE		Equipo:	ANESTESIA BASICA
Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Modelo:	Carestation 620
Dirección:		Serie:	SM624330014MD
Teléfono:			

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	28-ago-25	11:00	28-ago-25	14:00
Fin del servicio:	28 de agosto de 2025			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				
Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio				

SERVICIO		
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)	
Tipo de Trabajo:	GARANTÍA	
Contrato No.		
SINTOMA		
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
20/09/2025	4830029/4834028	Analizador de flujo y presión
03/10/2025	5989068	Analizador de seguridad eléctrica

Servicio realizado de acuerdo a documento: EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE LISTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO FUNCIONANDO AL 100%	2076164-001 SI SI	✓ ✓
---	-------------------------	--------

DEL SEGURO SOCIAL		Observaciones
		FUNCIONANDO AL 100%
	CONSERVACIÓN	
HGR No. 1	Reprogramación del Servicio:	

8/14/16

Condiciones en que se deja el equipo:		FUNCIONANDO	
Kit y refacciones utilizadas en el servicio			
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON

[illegible]

CONSERVACION	Firmas de Aceptación y Visto Bueno:
H.G.R. No. 1	

Miguel Arenas Nombre completo Tijuana, B.C. Ingeniero de Servicio	Nombre completo Jorge Marroquin Romero Jefe de Anestesiología Mat. 11532416 Cargo Hospital General Regional No. 1 Matrícula Jefe de Área / Usuario Responsable	Nombre completo Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980 Jefe de conservación
--	--	---

Este compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>

Nombre del cliente / unidad: HGR No. 1

Número de serie (SID): SM624330013MD

Equipo: ANESTESIA BASICA

Modelo: Carestation 620

Case: 13450848

Versión de software: 06

Fecha: 28/08/2025

Notar: este formulario no sustituye al formulario digital de SIMS BBMCG1377. Es necesario consultarlo, completarlo y someterlo adicionalmente.
 Es necesario consultar el TRM 2108494-001 para descripción completa de las pruebas.

Frecuencia	Reemplazo programado de partes	Cantidad	Reemplazado	N/A
Cada 12 meses	Orings de puertos de vaporizador PN 1102-3016-000			
Cada 24 meses	Válvula de libre respiración PN 0211-1454-100	1	X	
Cada 24 meses	Oring de la válvula de libre respiración PN 1503-3208-000	1		X
Cada 36 meses	Baterías del sistema (par) 5931866-S	1		X
Cada 48 meses	Batería del display PN 1009-5800-000	1		X
Cada 48 meses	Kit de válvulas check del sistema de respiración PN 2071067-001-S	1		X
		2		X

Tareas de mantenimiento preventivo

	Aprobado	No aprobado	N/A
Verificar hora del sistema, modificar la hora y reiniciar el equipo si es necesario			
Comprobación del sistema TRM 3.3.1, prueba completa aprobada	X		
Prueba de fugas de baja presión TRM 3.5.1 y 3.5.2	X		
Inspección visual TRM 13.2.1	X		
Inspección del sistema de respiración TRM 13.2.2	X		
Inspección del ventilador (válvula espiratoria) TRM 13.2.3	X		
Verificar avisos TRM 13.2.4	X		
Prueba de fallo de alimentación y prueba de capacidad de la batería TRM 13.2.5	X		
Prueba de canalización y botellas. TRM 13.2.6	X		
Prueba de mezcladora de gases TRM 13.2.7			X
Diagnósticos de pantalla TRM 13.2.9 (Comprobar leds, altavoz, batería, teclas físicas, LCD, calibración de pantalla táctil).	X		
Pruebas y calibraciones del ventilador TRM 13.2.8:	X		
Calibración de usuario			
Calibración de Manifold P Span	X		
Calibración de válvula de flujo inspiratorio	X		
Calibración de bleed resistor	X		
ACGO / AGSS a cero	X		
Calibración de Paw Span	X		
PAW y ACGO			X
Transductores de gas a cero	X		
Mezclador P a cero	X		
Prueba del circuito de límite de presión	X		
Prueba de la válvula de seguridad de presión MOPV	X		
Pruebas de flujo auxiliar TRM 13.2.11			X
Pruebas del regulador del sistema aspiración integrado TRM 13.2.13			X
Prueba de válvula de seguridad de presión ACGO TRM 13.2.14	X		
Inspección y pruebas AGSS TRM 13.2.15	X		
Prueba del flujo de emergencia TRM 13.2.16			X
Prueba de contrapresión y enclavamiento del vaporizador TRM 13.2.17	X		
Pruebas de alarma TRM 13.2.19	X		
Comprobación del sistema 13.2.20	X		
Pruebas de seguridad eléctrica (instalaciones de 110/120 Vca) TRM 13.2.21:	X		
Resistencia a tierra es menor a 0.2 Ω , corriente de fuga a tierra es menor a 500 μ A. Resistencia medida: 0.1			
Corriente medida: 34			
Comprobaciones finales del equipo TRM 13.2.22			
Módulo de gases: completar tareas de mantenimiento preventivo de módulo de gases conforme a TRM 2106778-004	X		
	X		

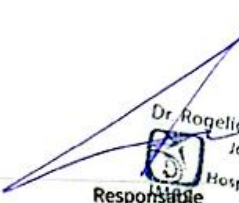
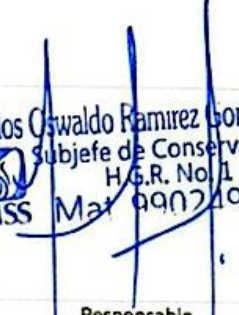


Nota: este formulario no sustituye al formulario digital de SIMS BBMCG1377. Es necesario consultarlo, completarlo y someterlo adicionalmente.
Es necesario consultar el TRM 2108494-001 para descripción completa de las pruebas.

Herramientas utilizadas

Descripción	Marca / Modelo	Número de serie	Barcode	Fecha de próxima calibración
Analizador de seguridad eléctrica	FLUKE/ESA 612	5989068	T035718	03 Oct 2025
Analizador de flujo y presión	FLUKE/VT900A	4830029/4834028	T012936	20/09/2025

Firmas de conformidad

 MIGUEL ARENAS MORENO Ingeniero de servicio Nombre y firma, SSO: 212807304	 Dr. Rogelio Marroquin Romero Jefe de Anestesiología Mat. 11532416 Hospital General Regional No. 1 Responsable Nombre y firma	 Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 09021980 Responsable Nombre y firma
---	--	--

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL**RECEBIDO**
28 AGO 2025CONSERVACIÓN
HGR No. 1Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1