

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Douali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM185.11

15308894

WO-17305383

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	729
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290039HA
		SID GE:	SNT20290039HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	01-ago-25	11:00	01-ago-25	12:30
Fin del servicio:	1 de agosto de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2109358-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Kit y refacciones utilizadas en el servicio	No. Orden / No. de GON
		Descripción	
		No Aplica	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

EJP. Cecylia Ines
Orduno López Mat: 99072212

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Nombre completo

Carlos Osvaldo Ramirez González

Subjefe de conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat: 89024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290039HA

SW Ver:

Caso: 16808994

WO: WO-17305383

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Instalación
Preventivo

☒

Seguridad eléctrica

Inspección visual	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	☒	☐	☐
Carcasa y pantalla	☒	☐	☐
Módulos y periféricos	☒	☐	☐
Cables y accesorios	☒	☐	☐

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.11	< 0.2
µA	µA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	93.8	<300
Pol Norm, N abierto	211	<1000
Pol Rev, N abierto	211	<1000
Pol Rev	91	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	0.5	<100
Pol Norm, N abierto	110	<300
Pol Norm, G abierta	78	<300
Pol Rev, G abierta	76	<300
Pol Rev, N abierto	108	<300
Pol Rev	0.6	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.3	<10
Pol Norm, N abierto	0.5	<50
Pol Norm, G abierta	0.3	<50
Pol Rev, G abierta	0.6	<50
Pol Rev, N abierto	0.6	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	0	<50
Pol Rev	0	<50

Pruebas funcionales

Pruebas funcionales	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	☒	☐	☐
Configuraciones y hora	☒	☐	☐
Prueba de pantalla táctil	☒	☐	☐
Detección de módulos	☒	☐	☐
Teclado y perilla	☒	☐	☐
Alarma audible	☒	☐	☐
Alarma visual (LED)	☒	☐	☐
Estado de red MC / IX	☐	☒	☐
Log de errores	☒	☐	☐
Tendencias	☒	☐	☐
Impresora	☐	☒	☐
Estado de batería >15min	☒	☐	☐
Pruebas ECG	☒	☐	☐
Pruebas Temperatura	☒	☐	☐
Pruebas de PANI	☒	☐	☐
Pruebas de SPO2	☒	☐	☐
Pruebas de P.Invasivas	☐	☒	☐
Módulo respiratorio	☐	☒	☐

Modelo / NS:

Calibración de gases	☐	☒	☐
Prueba espirometría	☐	☒	☐
Línea de muestreo y D-Fend	☐	☒	☐

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
2069650-001 CPU Battery	☐	☒	☐

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	ES612	5989068	03 Oct 2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y Firma


EJP. Cecylia Ines
Orduño López Mat. 9902217

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Responsable
Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

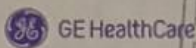

DEL SEGURO SOCIAL
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaline No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com
01 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Reporte fotográfico
MAM185.11

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

No. Contrato 050GYR019N09125-011-40

SID GE: SNT20290039HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450


Serie: SNT20290039HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAOB / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

AN
TE
R
S
V
I
D
C
E
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L

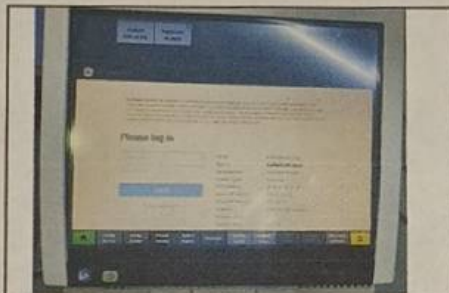

D
E
S
P
E
R
E
V
I
S
I
O
N
E
S



Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

EJP. Carlos O. López
Orduño López Mat. 99022217

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Osvado Ramírez González
Nombre completo
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

Clave Presupuesto:
0205 0214 2902

<http://ecso.gehealthcare.com/>

H.G.R. No.1