

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jalime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: lmss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM185.36

15308900

WO-17305385

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	735
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290057HA
		SID GE:	SNT20290057HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	01-ago-25	12:30	01-ago-25	14:00
Fin del servicio: 1 de agosto de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2109358-001

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se dejó el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Kit y refacciones utilizadas en el servicio	No. Orden / No. de GON
		Descripción	
		No Aplica	

Sello de Unidad
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

EJP. Cecylia Ines

Orduna López Mat. 99022217

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación


H.G.R. No.

Mat. 99022217

Matrícula


Jefe de conservación

nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

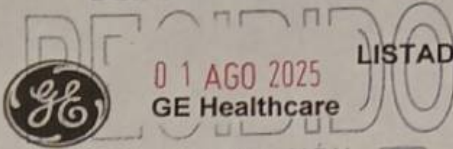

01 AGO 2025
GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

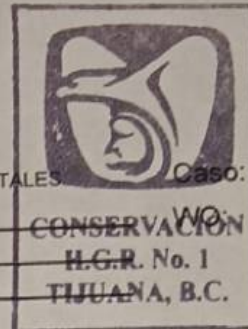

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290057HA
SW Ver:

Caso: 15308900
WO: WO-17305383

Instalación
Preventivo

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Seguridad eléctrica

Inspección visual	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Carcasa y pantalla	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Resistencia a tierra

Ohm
0.1
µA

Ohm
< 0.2
µA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	89.1	<300
Pol Norm, N abierto	196	<1000
Pol Rev, N abierto	199	<1000
Pol Rev	90.4	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	0.9	<100
Pol Norm, N abierto	97.4	<300
Pol Norm, G abierta	103	<300
Pol Rev, G abierta	104	<300
Pol Rev, N abierto	97.3	<300
Pol Rev	1.1	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.9	<10
Pol Norm, N abierto	0.7	<50
Pol Norm, G abierta	0.9	<50
Pol Rev, G abierta	0.8	<50
Pol Rev, N abierto	0.7	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	0	<50
Pol Rev	0	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
2069650-001 CPU Battery	Ø	Ø	Ø

Pruebas funcionales	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	Ø	Ø	Ø
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado y perilla	Ø	Ø	Ø
Alarma audible	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø
Modelo / NS:			
Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Linea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	ES612	5989068	03 Oct 2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Carios Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Ing. Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y Firma

EJP. Cecylia Ines
IMSS Orduña López Mat. 99022217

Responsable
Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Responsable
Nombre y Firma

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



GE Healthcare

01 AGO 2025

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención al Cliente Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com



CONSERVACIÓN

HGR No. 1



Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE:	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	Tijuana

No. De Orden

Reporte fotográfico

MAM185.36

No. de caso

15308900

No. de WO

WO 17305385

No. Contrato 05067015000120-011-00

SID GE: SNT20290057HA

Equipo: MONITOR DE

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290057HA

CONSERVACIÓN


H.G.R. No. 1

Tijuana, B.C.

AN
TE
R
S
I
D
C
E
I
O



D
U
S
E
R
V
I
C
I
O

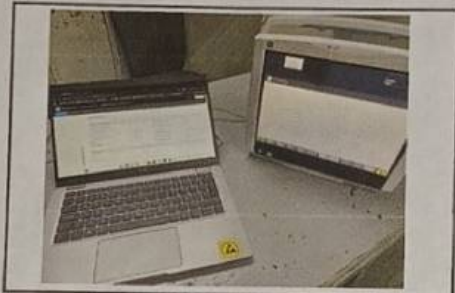

D
E
S
P
E
R
V
I
C
I
O



Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

IMP. Cecilia López
IMSS Orduño López Mat. 99022217

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González

Nombre completo

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1