

| Área Operativa de Vigilancia                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | Área de conservación y mantenimiento                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma Remisa</p> <p>Carlos E. Siles A.</p> <p>Nombre</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma</p> | <p>Área Usuaria</p> <p>Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera</p> <p>Médico Radiólogo</p> <p>Jefatura de Imagenología HGR1</p> <p>Nombre</p> <p>Ced. Exp. 11980592</p> <p>Mat. 68024495</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma</p> | <p>Área de conservación y mantenimiento</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nombre</p> <p>Carlos Oswaldo Ramírez González</p> <p>Subjefe de Conservación</p> <p>H.G.R. No. 1</p> <p>Firma</p> <p>Mat. 99024980</p> |





**Remsa®**  
Equipos Médicos  
y Servicios que Ayudan a Salvar Vidas

Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.  
Calzada de Tlalpan 4892, Col. Tlalpan, CP.14000,  
Ciudad de México, México.  
Tel: (55) 5513 9959  
REM8810176J7

## REPORTE FOTOGRAFICO DE SERVICIO

Equipo: Ultrasonido

Marca: Esaote

Modelo: MyLab Seven

Número de Serie: 3501


Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social

No. De Contrato: 050GYR019N09125-016-00

Lugar: HGR No. 1 Tijuana

Estado Inicial del Equipo: Equipo se encuentra encendido.

Fotos Antes al Servicio:

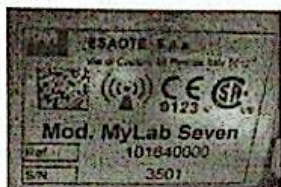


Fecha: 23/02/2026

Realizó: Cesar Enrique Salinas Chamorro


Orden de Trabajo: 42663

Tipo de Servicio: Preventivo

Fotos Durante el Servicio:

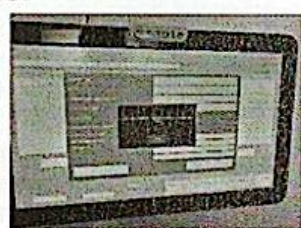

Fotos Después del Servicio:

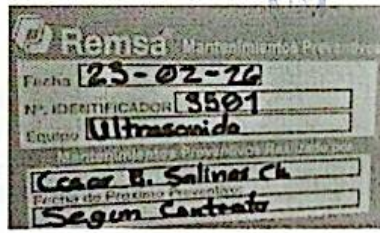

Estado Final del Equipo: El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, funcionando al 100%

Cesar E. Salinas Ch.  
Personal Remsa

Dra. Alejandra Lucero Martínez Zavala  
Médico Radiólogo  
Jefatura de Imagenología HGR1  
Ced. Es: 280392  
Tel: 060 3405  
Usuario

Carlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat 99024980  
Conservación

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

www.remsamexico.com





**Remsa®**  
Equipos Médicos  
y Servicios que Ayudan a Salvar Vidas

Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.  
Calzada de Tlalpan 4892, Col. Tlalpan, CP.14000,  
Ciudad de México, México.  
Tel: (55) 5513 9959  
REM8810176J7

## Checklist Ultrasonido

Nombre de la Institución: HGR No. 1  
Equipo: Ultrasonido  
Marca y modelo: Esaote, MyLab Seven  
Número de Serie: 3501

Contrato: 050GYR019N09125-016-00  
No. Mito: 3  
OT: 42663  
Fecha: 23/02/2026

### 1.- Inspección Visual

- 1.1 Inspección visual.
- 1.2 Tapas laterales.
- 1.3 Revisión de monitor: display, seguros y conexiones. NS: DV1727037
- 1.4 Panel de control: botones, perillas, trackball y pantalla táctil.
- 1.5 Sistema de llantas y seguros.
- 1.6 Estado de carro o base para equipo.
- 1.7 Estado físico de Transductor (es):  
Transductor 1: Modelo SL1543 con numero de serie 240400683C  
Transductor 2: Modelo AC2541 con numero de serie 231900716A  
Transductor 3: Modelo SE3123 con numero de serie 173500453C  
Transductor 4:  
Transductor 5:
- 1.8 Movimiento/rotación de panel y columna de panel.
- 1.9 Conexiones a periféricos impresora y/o Dicom.
- 1.10 Revisión de conexión de equipo a UPS, estado y funcionamiento. NS:



| Funcional                           |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SI                                  | NO                       | N/A                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


### 2.- Pruebas de funcionamiento inicial

- 2.1 Funcionamiento de panel de control: trackball, botones, perillas y pantalla táctil.
- 2.2 Reconocimiento de transductor(es) en todos los puertos y verificación de imagen sin artefactos.
- 2.3 Funcionamiento de Modos: B, M, CFM y PW.
- 2.4 Medidas.
- 2.5 Funcionamiento de unidades de almacenamiento DVD y USB.
- 2.6 Funcionamiento de ventiladores.
- 2.7 Funcionamiento de baterías.



### 3.- Mantenimiento y Limpieza

- 3.1 Depuración de base de datos.
- 3.2 Desfragmentación unidades de almacenamiento.
- 3.3 Revisión y configuración: fecha, hora, glosario, unidades de medida y periféricos.
- 3.4 Actualización de software en caso de ser necesario.
- 3.5 Limpieza, sopleteo y revisión de Rack/PC: tarjetas, cables, conexiones, batería BIOS, fuentes de alimentación, ventiladores y puertos de transductores.
- 3.6 Limpieza, sopleteo y revisión de conexiones en panel.
- 3.7 Limpieza y lubricación de trackball.
- 3.8 Calibración de pantalla táctil.
- 3.9 Limpieza de tapas, cubiertas generales y accesorios (transductores).

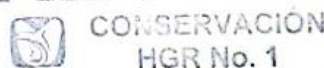

**Clave Presupuestal**  
**0205 0214 2902**  
**H.G.R. No.1**

|                                     |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 4.- Pruebas de funcionamiento final

- 4.1 Arranque del equipo, reconocimiento y funcionamiento de transductores.
- 4.2 Funcionamiento de ventiladores.
- 4.3 Reconocimiento de impresoras, sistema DICOM y periféricos conectados al equipo.
- 4.4 Funcionamiento de unidades de almacenamiento internas (HDD) y externas (DVD/USB).
- 4.5 Funcionamiento general imagen modos: B, M, CFM, PW.
- 4.6 Entrega del equipo.

|                                     |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del personal de Servicio:

Cesar E. Salinas A.

Firma del personal usuario:

Dr. Alejandro Lucero Martínez Rivera  
Médico Radiólogo  
Especialista en Imagenología HGR1  
Ced. Esp. 11980592  
IMSS

Firma del personal

Conservación / Biomédica:  
Carlos Oswaldo Jiménez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat. 99024980

www.remsamexico.com