

72004009

CONS:

FECHA: 16/12/2025	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.7		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6649729898		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 040T00923-262		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
COTIZACIÓN: N/A		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: BOULEVARD SALINAS Y FCO. SARABIA NO. 802, COLONIA AVIACION, C.P. 22014, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	
ATENCIÓN: ING. ALBERTO GUTIERREZ TOLEDO		REFACCIONES: ☐	
CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		LUGAR DE SERVICIO:	
FALLA REPORTADA: N/A		EN SITIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EMPRESA: ☐	
ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1490
NO. INVENTARIO: 202380013909	SOFTWARE: G.S. 2	UBICACIÓN FÍSICA: Cúneros	
HORAS DE USO EQUIPO: N/A	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: N/A			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18.5529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:			
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Ing. Dayan Monarrez Valencia	Ing. SJE Veredín Quintanilla	Carlos Osvaldo Ramírez González	
Ingeniera de Servicio	Ingeniero de Servicio	Subjefe de Conservación	
Cédula: 14432886	Cédula: 99022410	H.G.R. No. 1	
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 16/12/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72004009

MODELO AtmosCare Adventum

NÚMERO DE SERIE: AP 17-1490

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES	✓	
2.	REALIZAR PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN		
2.1	VERIFICACIÓN MECÁNICA Y DE CONTROL	✓	
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓	
	REVISAR ESTRUCTURA EXTERNA DEL EQUIPO PARA DESCARTAR DAÑO	✓	
	VERIFICAR SISTEMA MECÁNICO (TRASLADO, INCLINACIÓN DE CAMA Y MANIOBRAS CON PACIENTE)	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO/FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO LATERALES	✓	
	VERIFICAR QUE LAS RUEDAS DEL EQUIPO HACEN ADECUADO CONTACTO CON EL PISO, REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE FRENADO	✓	
	VERIFICAR Y PROBAR APERTURA Y CIERRE DE PANELES LATERALES	✓	
	VERIFICAR SOPORTE DE MONITOR DE SIGNOS VITALES*	✓	
	VERIFICAR ESTADO DE PLACA DE RAYOS X*	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE SENSORES DE TEMPERATURA	✓	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FÍSICO DE CAJONES*	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL COLCHÓN	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE LA BALANZA *	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO Y MOVIMIENTOS DE LA BASE PARA EL COLCHÓN	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE CONECTORES PARA BALANZA, SENSORES DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA AMBIENTAL	✓	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL PANEL DE MEMBRANA DE LA UNIDAD DE CONTROL, PERILLA DE CONTROL Y DISPLAY DE DATOS	✓	
2.2	VERIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS	✓	
	TARJETAS ELECTRÓNICAS	✓	
	CONECTORES ELECTRÓNICOS	✓	
2.3	VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO	✓	
	FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR	✓	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE FOTOTERAPIA*	✓	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE LAMPARA MULTIFUNCIÓN*	✓	
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMA SONORA	✓	
	VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA	✓	
	VERIFICAR Y PROBAR QUE INDICADOR DE MODALIDAD MANUAL ESTE ACTIVADO	✓	
	AJUSTAR Y VERIFICAR QUE LA SELECCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA SE ACTIVEN AL NIVEL DESEADO	✓	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE PESAJE DE BÁSCULA*				☒
3.	REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO				☒
4.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA				☒
	☒	✓/x		✓/x	☒
	CORRIENTE DE FUGAS	✓	0.1 μ A	VOLTAJE DE LINEA	✓
				122 V	RESISTENCIA A TIERRA
					✓
5.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL				☒
					0.37 Ω

**NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.
* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES:



Ing. Dayan Monarrez Valencia
Ingeniera de Servicio
Cédula: 14432888

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

Uly S. Noreña Quintana
IMSS 99022418

USUARIO DEL EQUIPO


NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
Jefe de Conservación y/o BIOMÉDICA
IMSS 99024980

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

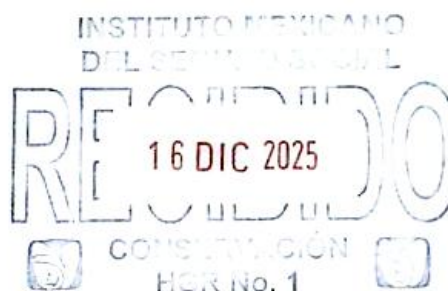

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1490

O.S.:

72004009

CONTRAT
O:

040T00923-262

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA:



Carlos Osvaldo Ramírez González
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMEDICA
N.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980