

ORDEN DE SERVICIO

72004027

CONS:

FECHA: 16/12/2025	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐	
CONTRATO NO. 040T00923-262		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
COTIZACIÓN: N/A		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		REFACCIONES: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
FALLA REPORTADA: N/A		EN SITIO: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐		EMPRESA: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1510
NO. INVENTARIO: 202380013901	SOFTWARE: G.S. 2	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:			
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
		16 DIC 2025	
		CONSERVACIÓN	
		MOR NO. 1	
FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Dayan Monarrez Valencia		Carlos Oswaldo Ramírez González	
Ingeniera de Servicio		Subjefe de Conservación	
Cédula: 14432888		H.G.R. No. 1	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 040T00923-262**

EMS. NOV 2021 GSIM-ST-F01-ATMADV-00

FECHA: 16/12/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72004027

MODELO AtmosCare Adventum

NÚMERO DE SERIE: AP17-1510

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES	☒	
2.	REALIZAR PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN	☒	
2.1	VERIFICACIÓN MECÁNICA Y DE CONTROL	☒	
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	☒	
	REVISAR ESTRUCTURA EXTERNA DEL EQUIPO PARA DESCARTAR DAÑO	☒	
	VERIFICAR SISTEMA MECÁNICO (TRASLADO, INCLINACIÓN DE CAMA Y MANIOBRAS CON PACIENTE)	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO/FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO LATERALES	☒	
	VERIFICAR QUE LAS RUEDAS DEL EQUIPO HACEN ADECUADO CONTACTO CON EL PISO, REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE FRENADO	☒	
	VERIFICAR Y PROBAR APERTURA Y CIERRE DE PANELES LATERALES	☒	
	VERIFICAR SOPORTE DE MONITOR DE SIGNOS VITALES*	☒	
	VERIFICAR ESTADO DE PLACA DE RAYOS X*	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE SENSORES DE TEMPERATURA	☒	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FÍSICO DE CAJONES*	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL COLCHÓN	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE LA BALANZA*	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO Y MOVIMIENTOS DE LA BASE PARA EL COLCHÓN	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE CONECTORES PARA BALANZA, SENSORES DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA AMBIENTAL	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL PANEL DE MEMBRANA DE LA UNIDAD DE CONTROL, PERILLA DE CONTROL Y DISPLAY DE DATOS	☒	
2.2	VERIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS	☒	
	TARJETAS ELECTRÓNICAS HGR No. 1	☒	
	CONECTORES ELECTRÓNICOS	☒	
2.3	VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO	☒	
	FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR	☒	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE FOTOTERAPIA*	☒	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE LAMPARA MULTIFUNCIÓN*	☒	
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMA SONORA	☒	
	VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA	☒	
	VERIFICAR Y PROBAR QUE INDICADOR DE MODALIDAD MANUAL ESTE ACTIVADO	☒	
	AJUSTAR Y VERIFICAR QUE LA SELECCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA SE ACTIVEN AL NIVEL DESEADO	☒	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 040T00923-262**

EMS. NOV 2021 GSIM-ST-F01-ATMADV-00

	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE PESAJE DE BÁSCULA*					✓			
3.	REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO					✓			
4.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA					✓			
	✓/x		✓/x		✓/x				
	CORRIENTE DE FUGAS	✓	0.1 μA	VOLTAJE DE LINEA	✓	123 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓	0.37 Ω
5.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL					✓			

**NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.
* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES:

SIM
Ing. Dayan Monarrez Valencia
Ingeniera de Servicio
Cédula: 14432886

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1510

O.S.:

72004027

CONTRAT


O:

040T00923-262

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE

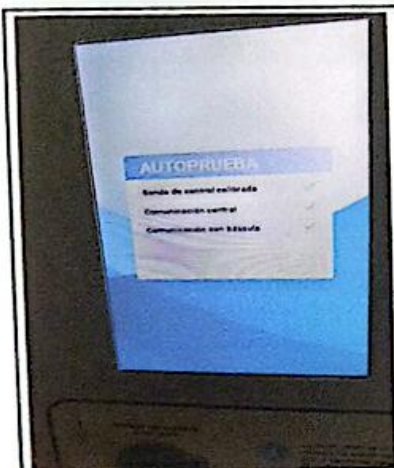

SELLO UNIDAD MÉDICA:



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
HGR No. 1
IMSS Mat 99024980