

72004143

CONS:

FECHA: 16-12-2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITÁCORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR040T00324-011- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 14801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUJEDE DE CONSERVACIÓN				EN SITIO: ☐			
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: LAMPARA DE FOTOTERAPIA		MARCA: BHELIUS		MODELO: ACTEA		NO. SERIE: AC 14-492	
NO. INVENTARIO: 202430051921		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: Cuneros			
HORAS DE USO EQUIPO: 98		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA CON ANALIZADOR EXTERNO, VERIFICACIÓN DE MODALIDAD DE LUZ DE EXPLORACIÓN, VERIFICACIÓN DE BASE RODABLE Y SOPORTE DE LA LÁMPARA, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18.5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%, EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				16 DIC 2025			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIÓN Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	1			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya Ingeniero de Servicio Cédula: 1527287		Lic. SJE Heredia Quintero del Ernesto Mat. 99022410		Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.C.R. No. 99024980		CONSERVACIÓN H.C.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

FECHA: 16-12-2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO: 72004143

LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA

MODELO BHELIUS ACTEA

NÚMERO DE SERIE: AC14-492

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	CABLE, CONECTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA	✓	
	CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓	
	CUBIERTAS PLÁSTICAS	✓	
	SUPERFICIE DEL TECLADO	✓	
	CUBIERTA DE LOS LEDS	✓	
2.	VERIFICACIÓN DE SOPORTE *		
	AJUSTE DE ALTURA	✓	
	POSICIÓN AJUSTABLE DE INCLINACIÓN	✓	
	MECANISMO DE UNIÓN DEL SOPORTE Y LA FOTOLÁMPARA	✓	
	POSICIONES	✓	
	RUEDAS	✓	
3.	VERIFICACIÓN DE FOTOLÁMPARA		
	TECLAS	✓	
	PANTALLA LCD	✓	
	VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO	✓	
	INTENSIDAD (40 uW/cm2.nm ± 10 % A 60CM DE DISTANCIA)	✓	
	LUZ DE EXAMINACIÓN	✓	
4.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA	✓	
5.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	✓	
	✓/x	✓/x	✓/x
	CORRIENTE DE FUGAS	✓	0.1 µA
	VOLTAJE DE LÍNEA	✓	122 V
	RESISTENCIA A TIERRA	✓	6.37 Ω
6.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL	✓	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*** EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES:

Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya
Ingeniero de Servicio
Cédula: 15272787

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

Lic. SJE Heredia Quintero
USUARIO DEL EQUIPO
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.C.R. No. 1
Mat 50024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AC14-492

O.S.: 72004143

CONTRATO: 050GYR040T00324-011-00


FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
16 DIC 2025
CONSERVACIÓN
H.C.R. No. 1



FOTO DURANTE

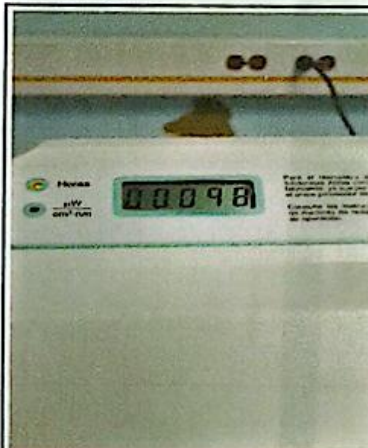

SELLO UNIDAD MÉDICA:



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA