



Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

N° de Orden
AB0098-C002

Fecha
11-dic.-25

OAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
C. Mantenimiento Correctivo

Modelo:	BABYLOG 8000	No. Serie:	ARUK-0011	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0098	Inventario:	200400069008	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	VENTILADOR VOLUMETRICO	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparacion por mejora, se instala tapa de perillas de parámetros.

Incidencias:
SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3267

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	8418045	CHARALETA BABYLOG 8000 PLUS	No aplica	9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
1	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: INSS Mat. 99024980
Firma:

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 11-dic.-25
Firma:

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Math De Leon Rivas
Puesto: Enfermero Jefe de Piso
Matrícula: 99024980
Fecha: 11/12/25
Firma:

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre:
Fecha:
Firma:

Sello de Unidad




Gerencia de
Av. Santa Fe 370 int. 5-4-11
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Oficina Cuernavaca
José Cuatrecasas, Americana
Col. Amexi C.P. 44140 Cuernavaca, Jal.
C.P. 44140 Cuernavaca, Jal.

Sello Firmado

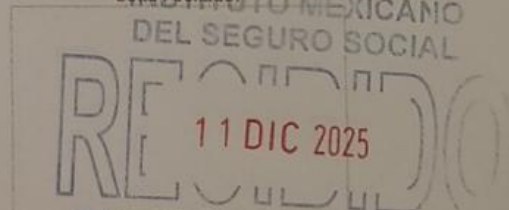

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0011

No. Orden: AB0098-C002

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha



11-dic.-25

Firma

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador

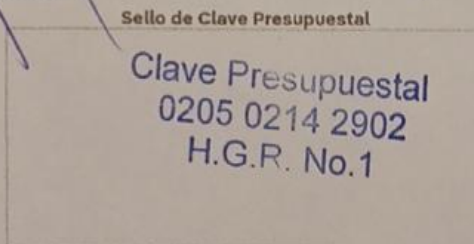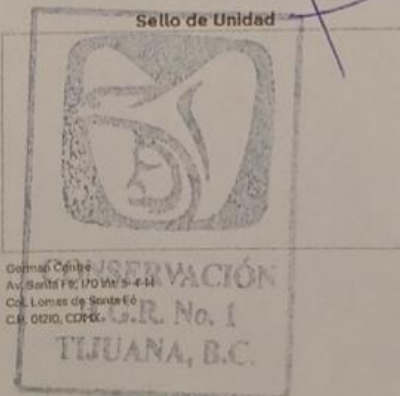

German Ceballos
Av. Santa Fe 170 W 5-44
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0210, CDMX

Oficina Operativa
José Oued Col. Americana
Col. Amer. C.P. 4440 Oudalajera, Jal.
C.P. 4440 Oudalajera, Jal.

NO imprimir esta hoja por duplicados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO.1

Número de Orden de Servicio:
AB0098-C002

ID Actividad de Servicio:
23B40774-850A-4948-81A0-04A3732A062E

Babylog 8000

Funcional

Número de Inventario:
200400069008

Número de Serie:
ARUK-0011

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-12-11

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4 Seguridad eléctrica	
1.1 Números de serie		4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)	
1.1.1 Válvula de espiración 1		4.1.1 Examen visual	
Válvula de espiración n.º 1	ARUK-0030 	Estado comprobado	Funcional 
1.2 Número de la versión de software		4.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Número de versión de software	5.01 	Máximo valor medido.	0.287 Ohm 
1.4 (Opción) Comunicación (disponible: Sí/No)		4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Comunicación (disponible: sí/no)	No 	Los puntos de medición se han explorado.	Funcional 
1.5 (Opción) HFV (disponible: Sí/No)		4.1.4 Corriente de fuga del equipo	
HFV (disponible: sí/no)	Sí 	Valor de referencia	158.7 µA 
1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: Sí/No)		Comprobación de repetición	158.7 µA 
PSV / VG (disponible: sí/no)	Sí 	4.3 Medidas finales	
3 Prueba de funcionamiento y de estado		4.3.1 Entrega del aparato	
3.1 Pruebas de estado		Entrega del dispositivos	Funcional 
3.1.1 Documentos adjuntos		5 Medios de comprobación	
Estado comprobado.	Funcional 	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria	
3.1.2 Aparato		5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
El aparato y sus piezas no están dañados.	Funcional 	Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional 
3.1.3 Carro			
El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas.	Funcional 		

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.