

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

N° de Orden

AB0183-C904

Fecha

4-sep.-25

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

Localidad

TIJUANA

Tipo de Mantenimiento

C. Mantenimiento Correctivo

Modelo: BABY THERM 8010

No. Serie: ARRM-0049

Marca: DRÄGER

No. Prod: AB0183

Inventario: 2002905890

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: CUNA DE CALOR RADIANTE

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparacion por error 16, se instala tarjeta controladora y software 1.01.

Incidencias:

Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3499

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	8290674	PCB WT Controller	ASTL-0097	9				
2	1	2M30440	SW Open care 1.01	N/A	10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2,5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto Ing. Javier Zamora Villalobos

Matricula Jefe de Conservación

Fecha Hospital General Regional No. 1

Firma IMSS Mat. 99020041

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

4-sep.-25

Firma

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matricula

Fecha

Firma

Lic. Omar Arturo Mercado Carrasco
Subjefatura de Enfermería
Mat. 99024518

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEBIDO
04 SEP 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1
NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Conservación
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. Amerl. C.P. 44040 Guadalupe, Jal.
C.P. 44040 Guadalupe, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0049


No. Orden: AB0183-C904

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento

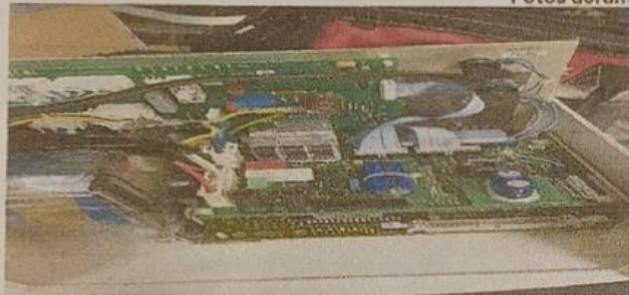

Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello de conservación, se debe llenar con la fecha de mantenimiento y la firma del responsable)

Nombre Ing. Javier Zamora Villalobos
Puesto Jefe de Conservación
Matricula IMSS Mat. 99020041
Fecha 04-sep-2025
Firma [Firma]

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Pedro Garcia Chacon
Fecha 4-sep.-25
Firma [Firma]

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
04 SEP 2025
NO imprimir esta hoja por ambos lados.
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



German Centre
Av. Santa Fe, 170
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0270, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amén C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0183-C904

ID Actividad de Servicio:
98208951-09A8-4063-B74C-C6BF37767015F

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905890

Número de Serie:
ARRM-0049

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
04-09-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Códigos de serie			
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010			
1.1.1.1 Babytherm 8004 / 8010			
Sistema electrónico básico (2M30283 o 2M30284)	2M30283	✓	
1.2 Versión del software			
Versión de software (Babytherm)	1.01	✓	
1.3 (Opcion) Fototerapia			
Fototerapia (horas de funcionamiento)	0	✓	
3 Seguridad del sistema eléctrico			
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)			
3.1.1 Examen visual			
Estado comprobado.	Funcional	✓	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección			
Máximo valor medido del aparato con líneas de conexión a la red eléctrica	0.129 Ohm	✓	
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección			
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	✓	
3.1.4 Corriente de fuga del equipo			
Valor de referencia de 100 V a 127 V	20,8 µA	✓	
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V	20,8 µA	✓	
4 Prueba de funcionamiento y de estado			
4.1 Pruebas de estado			
4.1.1 Documentos adjuntos			
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional	✓	
4.1.2 Letreros de Babytherm			
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional	✓	
4.1.4 Unidad de control y de regulación			
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional	✓	
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna			
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional	✓	
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta			
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional	✓	
4.1.7 Paneles			
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional	✓	
4.1.9 Radiador			
Radiador	Funcional	✓	
4.1.10 Varillas de calefacción			
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional	✓	
4.1.11 Placa base			
Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional	✓	
4.1.13 Otros accesorios			
Las piezas mencionadas no están sucias ni dañadas.	Funcional	✓	
4.2 Pruebas de funcionamiento			
4.2.1 Superficie de reposo			
Bloqueo de la superficie de reposo	Funcional	✓	
4.2.3 Prueba de encendido			
Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. En el display aparece en un texto legible la indicación: Todos los indicadores encendidos, bocina encendida. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional	✓	
4.2.6 Radiador			
Potencia de calefacción ajustable manualmente	Funcional	✓	
Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional	✓	
El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional	✓	
Regulación de la temperatura cutánea	Funcional	✓	
4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red			
Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional	✓	
4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"			
Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional	✓	
4.2.9 Calefacción de colchón (Babytherm 8010)			
Alarma +/- 1 °C de desviación del valor nominal y real	Funcional	✓	
Ajuste del valor nominal	Funcional	✓	
4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)			
La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional	✓	
4.2.12 (Opcion) Fototerapia			
Prueba de funcionamiento	Funcional	✓	
4.2.15 Medidas finales			
4.2.15. Adhesivo de comprobación y entrega del aparato			
Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo	Funcional	✓	
5 Medios de comprobación			
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria			
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional	✓	