

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2175.32

15301909

WO-16760760

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	833
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TUJANA	Serie:	SK416381236HA
		SID GE:	SK416381236HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	21-jul-25	8:30	21-jul-25	11:00
Fin del servicio: 21 de julio de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, de acuerdo a rutina de mantenimiento.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	090GYR019N09125-011-00
GON	4443903

SINTOMA	
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento:	M1222131		
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO			SI ✓
FUNCIONANDO AL 100%			SI ✓

Observaciones			
21 JUL 2025			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO			
HGR No. 1			

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No
Reprogramación del Servicio:	
No Aplica	

Condiciones en que se deja el equipo:	FUNCIONANDO
---------------------------------------	-------------

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	No. Orden / No. de GON

Descripción	

Sello de Unidad	Sello Clave Presupuestal
	Clave Presupuestal
	0205 0214 2902
	H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:		
Miguel Arenas Moreno		
Nombre completo	Nombre completo	Nombre completo

	Dr. Rogelio Marín Romero	
	Jefe de Anestesiología	
	Mat. 2172416	
	Hospital General Regional	
	No. 1	
	Jefe de Área / Usuario Responsable	
	Carlos Oswaldo Ramírez González	
	Subjefe de Conservación	
	Jefe de Conservación	
	Mat. 94024980	

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS



GE Healthcare



Equipo: Monitor de Signos Vitales
Modelo: CARESCAPE B650
Serie: SK416381236HA
SW Ver:

Caso: 15301909
WO: WO-16760760

Instalación Preventivo

✓

Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Carcasa y pantalla	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	Ø	Ø	Ø
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado y perilla	Ø	Ø	Ø
Alarma audible	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø

Modelo / NS:

Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Corriente de fuga a tierra

	Ohm	Ohm
Resistencia a tierra	0.1	< 0.2
Corriente de fuga a tierra	µA	µA
Pol Norm	42	<300
Pol Norm, N abierto	161	<1000
Pol Rev, N abierto	152	<1000
Pol Rev	40	<300

Corriente de fuga a chasis

	Ohm	Ohm
Corriente de fuga a chasis	12	<100
Pol Norm	114	<300
Pol Norm, N abierto	103	<300
Pol Norm, G abierta	109	<300
Pol Rev, G abierta	120	<300
Pol Rev, N abierto	13	<100

Corriente fuga tierra ECG

	Ohm	Ohm
Corriente fuga tierra ECG	0.2	<10
Pol Norm	0.2	<50
Pol Norm, N abierto	0.9	<50
Pol Norm, G abierta	0.7	<50
Pol Rev, G abierta	0.1	<50
Pol Rev, N abierto		<10

Corriente fuga (sink) ECG

	Ohm	Ohm
Corriente fuga (sink) ECG	0	<50
Pol Norm	0	<50
Pol Rev		

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
M1168350 CPU Battery		Ø	Ø	Ø

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
SAFETY ANALYZER	FLUKE	FLUKE ES	5989068	03/10/2025

Comentarios y registro de módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Ing Miguel Arenas Moreno

Ingeniero

Nombre y Firma

Dr. Rogelio Márquez Romero
Jefe de Anestesiología
Tel: 11532416
Hospital General Regional



Responsable

Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación



Responsable

Nombre y Firma

GE Healthcare



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2175.32

No. de caso

15301909

No. de WO

WO-16760760

No. Contrato

050GYR019N09125-011-00

SID GE:

SK416381236HA

Equipo:

MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo:


CARESCAPE B650

Serie:

SK416381236HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: H.G.R. No. 1
Localidad: TIJUANA, B.C.

A
N
T
E
R
S
V
I
D
E
I
L
O

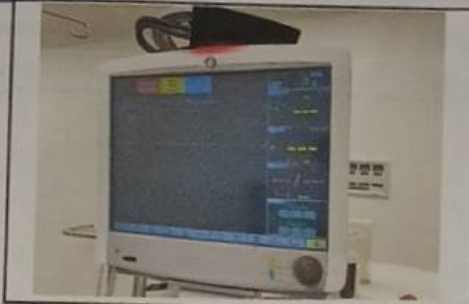

D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo
Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Área / Usuario Responsable
IMSS
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez González
Cargos
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS
Matrícula

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>