

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio
No. de caso
No. de WO

Hoja de servicio
MAM2275.8

15301910
WO-16760761

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	834
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TUJANA	Serie:	SK416381234HA
		SID GE:	SK416381234HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	22-jul-25	8:00	22-jul-25	9:30
Fin del servicio:	22 de julio de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, de acuerdo a rutina de mantenimiento.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443903

SINTOMA


1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5868067-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

SI ✓
SI ✓

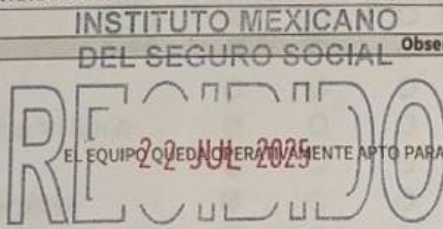

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		NO APLICA	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Dr. Rogelio Marroquín Romero

Jefe de Geriatria

Hospital General Regional

No. 1

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargo

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS

Mat 99024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: Monitor de Signos Vitales

Modelo: CARESCAPE B650

Serie: SK416381234HA

SW Ver:

Caso: 15301910

WO: WO-16760761

Instalación
Preventivo

Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	O	O
Carcasa y pantalla	Ø	O	O
Módulos y periféricos	Ø	O	O
Cables y accesorios	Ø	O	O

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	Ø	O	O
Configuraciones y hora	Ø	O	O
Prueba de pantalla táctil	Ø	O	O
Detección de módulos	Ø	O	O
Teclado y perilla	Ø	O	O
Alarma audible	Ø	O	O
Alarma visual (LED)	Ø	O	O
Estado de red MC / IX	Ø	O	O
Log de errores	Ø	O	O
Tendencias	Ø	O	O
Impresora	O	Ø	O
Estado de batería >15min	Ø	O	O
Pruebas ECG	Ø	O	O
Pruebas Temperatura	Ø	O	O
Pruebas de PANI	Ø	O	O
Pruebas de SPO2	Ø	O	O
Pruebas de P.Invasivas	Ø	O	O
Módulo respiratorio	O	Ø	O
Modelo / NS:			
Calibración de gases	O	Ø	O
Prueba espirometría	Ø	O	O
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	O	O

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.1	< 0.2
µA	µA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	55	<300
Pol Norm, N abierto	116	<1000
Pol Rev, N abierto	114	<1000
Pol Rev	54	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	16	<100
Pol Norm, N abierto	110	<300
Pol Norm, G abierta	103	<300
Pol Rev, G abierta	104	<300
Pol Rev, N abierto	109	<300
Pol Rev	15	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.3	<10
Pol Norm, N abierto	0.2	<50
Pol Norm, G abierta	0.5	<50
Pol Rev, G abierta	0.6	<50
Pol Rev, N abierto	0.2	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	0	<50
Pol Rev	0	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
M1168350 CPU Battery	O	Ø	O

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
SAFETY ANALYZER	FLUKE	FLUKE ES	5989068	03/10/2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.


Clave Presupuestal
0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Dr. Rosalva Martínez Romero
Jefe de Anestesiología
IMSS
Hospital General Regional
No. 1Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
IMSS
Hospital General Regional
No. 1
24980

Ing Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y FirmaResponsable
Nombre y FirmaResponsable
Nombre y Firma

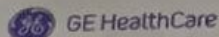

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2275.8

No. de caso

15301910

No. de WO

WO-16760761

No. Contrato 050GYRD19N09125-011-00

SID GE: SK416381234HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B650

Serie: SK416381234HA


Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

AN
TE
R
S
V
I
D
C
E
L
O

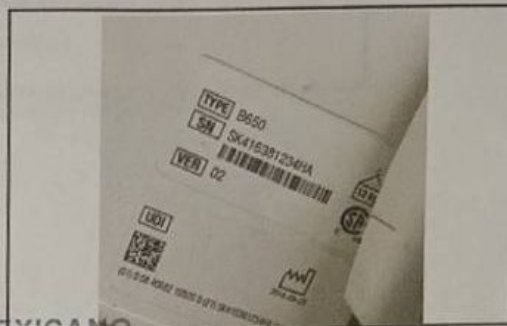

D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
V
I
C
I
O



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Moreno Romero
Nombre completo
Médico Anestesiólogo
Tel. 11532416
Hospital General Regional
No. 1

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Max 59024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://ecso.gehealthcare.com/>