

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15301911

WO-16760762

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

SID GE: SK416381225HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B650

Serie: SK416381225HA


AN
S
T
E
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
V
É
S
I
C
D
I
O
L

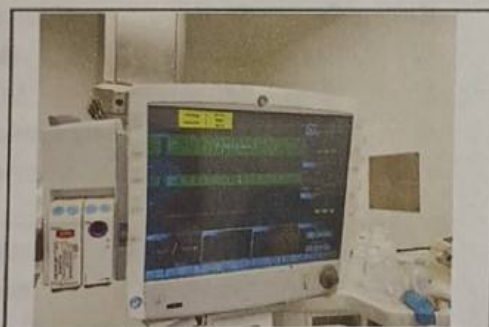

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Observaciones

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dra. Wendy Lizbeth Valdez Mondaca
CP 6833095 ESP 9736400
MAT 98260566
Anestesiólogo

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
Jefe de conservación



LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

GE Healthcare

21 JUL 2025

Equipo: Monitor de Signos Vitales

Modelo: CARESCAPE B650

Serie: SK416381225HA

SW Ver:

Caso: 15301911

WO: WO-16760742

Instalación Preventivo

CONSERVACION HGR No. 1



SW Ver:



Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	O	O
Carcasa y pantalla	Ø	O	O
Módulos y periféricos	Ø	O	O
Cables y accesorios	Ø	O	O

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	Ø	O	O
Configuraciones y hora	Ø	O	O
Prueba de pantalla táctil	Ø	O	O
Detección de módulos	Ø	O	O
Teclado y perilla	Ø	O	O
Alarma audible	Ø	O	O
Alarma visual (LED)	Ø	O	O
Estado de red MC / IX	Ø	O	O
Log de errores	Ø	O	O
Tendencias	Ø	O	O
Impresora	O	Ø	O
Estado de batería >15min	Ø	O	O
Pruebas ECG	Ø	O	O
Pruebas Temperatura	Ø	O	O
Pruebas de PANI	Ø	O	O
Pruebas de SPO2	Ø	O	O
Pruebas de P.Invasivas	Ø	O	O
Módulo respiratorio	O	Ø	O

Modelo / NS:

Calibración de gases	O	Ø	O
Prueba espirometría	Ø	O	O
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	O	O

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	41	<300
Pol Norm, N abierto	112	<1000
Pol Rev, N abierto	112	<1000
Pol Rev	48	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	11	<100
Pol Norm, N abierto	108	<300
Pol Norm, G abierta	103	<300
Pol Rev, G abierta	102	<300
Pol Rev, N abierto	104	<300
Pol Rev	12	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.3	<10
Pol Norm, N abierto	0.1	<50
Pol Norm, G abierta	0.9	<50
Pol Rev, G abierta	0.6	<50
Pol Rev, N abierto	0.1	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	0	<50
Pol Rev	0	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
M1168350 CPU Battery	O	Ø	O

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	FLUKE ES	5989068	03/10/2025

Comentarios y registro de módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing Miguel Arenas Moreno

Ingeniero

Nombre y Firma
Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dra. Wendy Elizabeth Valdez Mondaca
CP 6833095 ESP 9736400

MAT 98260566
Responsable
Anestesiólogo

Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjeto de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Responsable
Nombre y Firma