

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Gavali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. de folio

Hoja de servicio
DMGD2975.15

No. de caso

15306893

No. de WO

WO-16768442

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Dependencia:

OOAD / UMAE

Unidad Médica:

Localidad:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BAJA CALIFORNIA

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

Interno:

728

Equipo:

MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo:

CARESCAPE B450

Serie:

SNT20290037HA

SID GE:

SNT20290037HA

Periodo de servicio

Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	29-Jul-25	15:00	29-Jul-25	17:00

Fin del servicio: 29 de julio de 2025

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento:

2088566-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:

No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant. # Parte / Catálogo Descripción No. Orden / No. de GON

No Aplica

Clave Presupuestal

020502142002

H.G.R. No.1

Daniela Miralva García Díaz

Nombre completo

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Nombre completo

Mat. 98020101
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

29 JUL 2025

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
DMGD2975.15

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15308893

WO-16768442

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290037HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290037HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COAD / UMAE: BUJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA

AN
TE
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
R
É
V
I
C
D
I
O
L



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Daniela Miroslava García Díaz

Nombre completo

[Signature]

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Cargo


[Signature]
Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

[Signature]
Carlos Usualdo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No 1

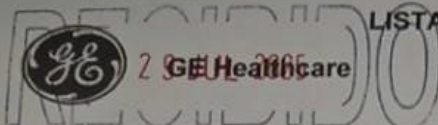

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

CONSERVACIÓN

Instalación HGR No. 1

Preventivo



Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: Carescape B450

Serie: SNT20290037HA

SW Ver: V3

Caso: 15308893

WO: WO-16768442

Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	☒	☐	☐
Módulos y periféricos	☒	☐	☐
Carcasa y pantalla	☒	☐	☐
Cables y accesorios	☒	☐	☐

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	☒	☐	☐
Prueba de pantalla táctil	☒	☐	☐
Detección de módulos	☒	☐	☐
Teclado	☐	☒	☐
Alarma audible (bocina)	☒	☐	☐
Alarma visual (LED)	☒	☐	☐
Estado de red MC / IX	☐	☒	☐
Log de errores	☒	☐	☐
Tendencias	☒	☐	☐
Impresora	☒	☐	☐
Estado de batería >15min	☒	☐	☐
Pruebas ECG	☒	☐	☐
Pruebas Temperatura	☒	☐	☐
Pruebas de PANI	☒	☐	☐
Pruebas de SPO2	☒	☐	☐
Pruebas de P.Invasivas	☒	☐	☐
Módulo respiratorio	☐	☒	☐
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	☐	☒	☐
Prueba espirometría	☐	☒	☐
Línea de muestreo y D-Fend	☐	☒	☐

Seguridad eléctrica

	Ohm	Ohm
Resistencia a tierra	0.16	< 0.2
	μA	μA
Corriente de fuga a tierra		
Pol Norm	114	<300
Pol Norm, N abierto	195	<1000
Pol Rev, N abierto	171	<1000
Pol Rev	114	<300
Corriente de fuga a chasis		
Pol Norm	92	<100
Pol Norm, N abierto	116	<300
Pol Norm, G abierta	117	<300
Pol Rev, G abierta	144	<300
Pol Rev, N abierto	123	<300
Pol Rev	91	<100
Corriente fuga tierra ECG		
Pol Norm	0.1	<10
Pol Norm, N abierto	0.4	<50
Pol Norm, G abierta	0.4	<50
Pol Rev, G abierta	0.2	<50
Pol Rev, N abierto	0.3	<50
Pol Rev		<10
Corriente fuga (sink) ECG		
Pol Norm	12	<50
Pol Rev	16	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
CPU Battery		☐	☒	☐



Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

CONSERVACIÓN
C.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero
Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramírez González

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

Responsable
Nombre y Firma

EJP Consuelo Orduño Vega
Mat. 98020055

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1