

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
DMGD2875.13

15308897

WO-16768446

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	732
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	Tijuana	Serie:	SNT20290054HA
		SID GE:	SNT20290054HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	28-Jul-25	13:00	28-Jul-25	15:00
Fin del servicio:	28 de julio de 2025			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2088566-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	

Sello de Unidad

Sello Cliente Presupuestal

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

Tijuana, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Nombre completo

Matrícula


Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Nombre completo
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

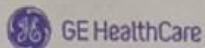

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Reporte fotográfico
DMGD2875.13

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15308897

WO-16768446

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: SNT20290054HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290054HA

AN
TE
R
S
V
I
D
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
É
S
I
C
I
O
L



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902



Daniela Miroslava García Díaz

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo

Cargo
Mat. 98020035

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargo
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: Carescape B450

Serie: SNT20290054HA

SW Ver: V3

Caso: 15308897

WO: WO-16768446

Instalación
Preventivo



Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	☒	☐	☐
Módulos y periféricos	☒	☐	☐
Carcasa y pantalla	☒	☐	☐
Cables y accesorios	☒	☐	☐

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	☒	☐	☐
Prueba de pantalla táctil	☒	☐	☐
Detección de módulos	☒	☐	☐
Teclado	☐	☒	☐
Alarma audible (bocina)	☒	☐	☐
Alarma visual (LED)	☒	☐	☐
Estado de red MC / IX	☐	☒	☐
Log de errores	☒	☐	☐
Tendencias	☒	☐	☐
Impresora	☒	☐	☐
Estado de batería >15min	☒	☐	☐
Pruebas ECG	☒	☐	☐
Pruebas Temperatura	☒	☐	☐
Pruebas de PANI	☒	☐	☐
Pruebas de SPO2	☒	☐	☐
Pruebas de P.Invasivas	☒	☐	☐
Módulo respiratorio	☐	☒	☐
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	☐	☒	☐
Prueba espirometría	☐	☒	☐
Línea de muestreo y D-Fend	☐	☒	☐

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.16	< 0.2
µA	µA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	116	<300
Pol Norm, N abierto	191	<1000
Pol Rev, N abierto	171	<1000
Pol Rev	113	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	97	<100
Pol Norm, N abierto	112	<300
Pol Norm, G abierta	113	<300
Pol Rev, G abierta	145	<300
Pol Rev, N abierto	123	<300
Pol Rev	95	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.2	<10
Pol Norm, N abierto	0.3	<50
Pol Norm, G abierta	0.1	<50
Pol Rev, G abierta	0.2	<50
Pol Rev, N abierto	0.3	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	16	<50
Pol Rev	12	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
CPU Battery		☐	☒	

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
28 JUL 2025

CONSERVACIÓN
MGR No. 50



Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99074980

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero
Nombre y Firma

Responsable
Nombre y Firma

Responsable
Nombre y Firma

IMP Consuelo Ordoño Vega
Mat. 98020055

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1