

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio
No. de caso
No. de WO

Hoja de servicio
DMGD2875.9

15308901
WO-16768450

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	736
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B490
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290075HA
		SID GE:	SNT20290075HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	28-Jul-25	9:00	28-Jul-25	11:00
Fin del servicio: 28 de julio de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2088566-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
-------	--------------------	-------------	------------------------

No Aplica



Daniela Miroslava García Díaz
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno

Nombre completo

Care

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

28 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1
FUNCIONANDO

Sello Clave Presupuestal


Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99074980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

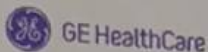

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jalime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
DMGD2875.9

No. de caso

15308901

No. de WO

WO-16768450

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: SNT2029007SHA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT2029007SHA


AN
TE
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
R
É
V
I
C
I
O
L

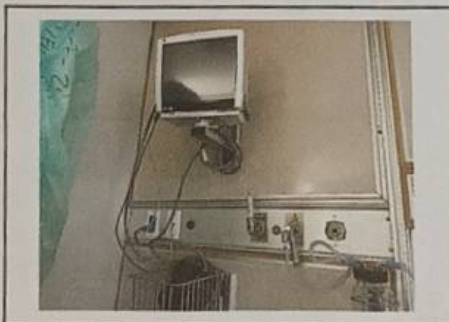

Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Daniela Miroslava García Díaz
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo

Cargo

Carlos Osvaldo Ramírez González
H.G.R. No. 1
99024980

Recibido

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Osvaldo Ramírez González
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
99024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: Carescape B450

Serie: SNT20290075HA

SW Ver: V3

Caso: 15308901

WO: WO-16768450

Instalación Preventivo



Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	Ø	Ø	Ø
Módulos y periféricos	Ø	Ø	Ø
Carcasa y pantalla	Ø	Ø	Ø
Cables y accesorios	Ø	Ø	Ø

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	Ø	Ø	Ø
Prueba de pantalla táctil	Ø	Ø	Ø
Detección de módulos	Ø	Ø	Ø
Teclado	Ø	Ø	Ø
Alarma audible (bocina)	Ø	Ø	Ø
Alarma visual (LED)	Ø	Ø	Ø
Estado de red MC / IX	Ø	Ø	Ø
Log de errores	Ø	Ø	Ø
Tendencias	Ø	Ø	Ø
Impresora	Ø	Ø	Ø
Estado de batería >15min	Ø	Ø	Ø
Pruebas ECG	Ø	Ø	Ø
Pruebas Temperatura	Ø	Ø	Ø
Pruebas de PANI	Ø	Ø	Ø
Pruebas de SPO2	Ø	Ø	Ø
Pruebas de P.Invasivas	Ø	Ø	Ø
Módulo respiratorio	Ø	Ø	Ø
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	Ø	Ø	Ø
Prueba espirometría	Ø	Ø	Ø
Línea de muestreo y D-Fend	Ø	Ø	Ø

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.1	< 0.2
µA	µA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	110	<300
Pol Norm, N abierto	190	<1000
Pol Rev, N abierto	210	<1000
Pol Rev	110	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	0	<100
Pol Norm, N abierto	117	<300
Pol Norm, G abierta	110	<300
Pol Rev, G abierta	145	<300
Pol Rev, N abierto	121	<300
Pol Rev	0	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.5	<10
Pol Norm, N abierto	0.7	<50
Pol Norm, G abierta	0.6	<50
Pol Rev, G abierta	0.5	<50
Pol Rev, N abierto	0.3	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	15	<50
Pol Rev		<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
CPU Battery		Ø	Ø	Ø

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

Comentarios y registro de módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero

Nombre y Firma

Responsable

Nombre y Firma

Responsable
Nombre y Firma

Carlos Uswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 00074980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

