

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
DMGD2875.15

15308895

WO-16768444

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	730
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290019HA
		SID GE:	SNT20290019HA

Período de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	28-Jul-25	15:00	28-Jul-25	17:00
Fin del servicio: 28 de julio de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo que consta de limpieza externa y consumibles, calibraciones, pruebas funcionales con analizadores y simuladores de signos vitales y pruebas de seguridad eléctrica.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2088566-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		No Aplica	



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

[Signature]

Nombre completo: *[Name]*

Matrícula: *[Matrícula]*

Matrícula


Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 290
H.G.R. No. 1

[Signature]
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula: 000001980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

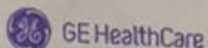

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
DMGD2875.15

No. de caso

15308895

No. de WO


WO-16768444

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00



Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

SID GE:	SNT20290019HA
Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo:	CARESCAPE B450
Serie:	SNT20290019HA


A
N
T
E
R
S
I
D
E
O

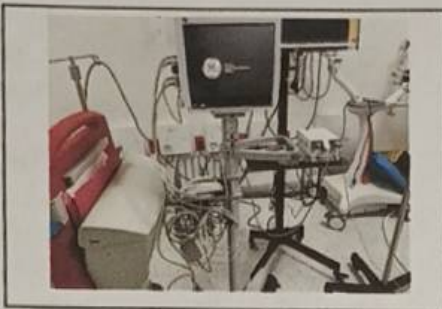

D
U
R
A
N
T
E
E
L

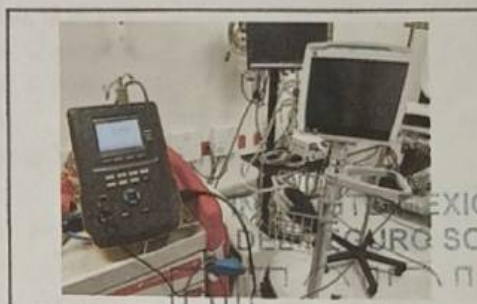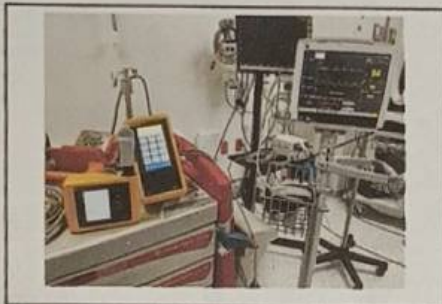

D
E
S
P
U
E
S
D
E
O

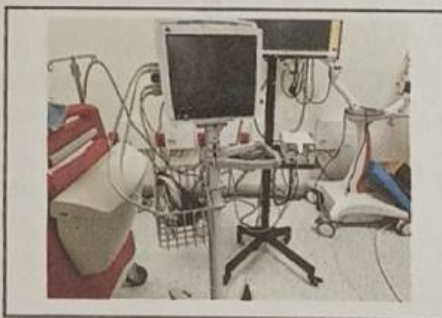

Observaciones

28 JUL 2025

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Daniela Miroslava García Díaz
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas y sello de Conformidad

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Caso: 15308895

Modelo: Carescape B450

WO: WO-16768444

Serie: SNT20290019HA

SW Ver: V3

Instalación
Preventivo

Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	☒	☐	☐
Módulos y periféricos	☒	☐	☐
Carcasa y pantalla	☒	☐	☐
Cables y accesorios	☒	☐	☐

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Configuraciones y hora	☒	☐	☐
Prueba de pantalla táctil	☒	☐	☐
Detección de módulos	☒	☐	☐
Teclado	☐	☒	☐
Alarma audible (bocina)	☒	☐	☐
Alarma visual (LED)	☒	☐	☐
Estado de red MC / IX	☐	☒	☐
Log de errores	☒	☐	☐
Tendencias	☒	☐	☐
Impresora	☒	☐	☐
Estado de batería >15min	☒	☐	☐
Pruebas ECG	☒	☐	☐
Pruebas Temperatura	☒	☐	☐
Pruebas de PANI	☒	☐	☐
Pruebas de SPO2	☒	☐	☐
Pruebas de P.Invasivas	☒	☐	☐
Módulo respiratorio	☐	☒	☐
Modelo / NS:	N/A		
Calibración de gases	☐	☒	☐
Prueba espirometría	☐	☒	☐
Línea de muestreo y D-Fend	☐	☒	☐

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.16	< 0.2
μA	μA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	115	<300
Pol Norm, N abierto	195	<1000
Pol Rev, N abierto	172	<1000
Pol Rev	116	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	95	<100
Pol Norm, N abierto	113	<300
Pol Norm, G abierta	116	<300
Pol Rev, G abierta	143	<300
Pol Rev, N abierto	122	<300
Pol Rev	97	<100

Corriente fuga tierra ECG


Pol Norm	0.1	<10
Pol Norm, N abierto	0.4	<50
Pol Norm, G abierta	0.4	<50
Pol Rev, G abierta	0.2	<50
Pol Rev, N abierto	0.3	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	15	<50
Pol Rev	12	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP	ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
CPU Battery		☐	☒	☐

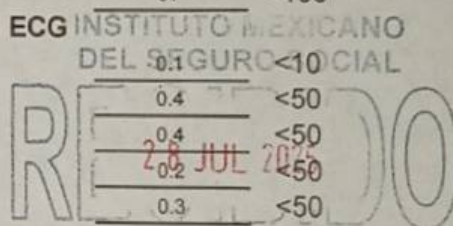CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Equipo/herramienta de medición utilizado				
Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
PATIENT SIMULATOR	FLUKE	PROSIM 4	5914006	17/10/2025
SAFETY ANALYZER	FLUKE	ESA 612	4355044	16/10/2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Daniela Miroslava García Díaz

Ingeniero
Nombre y FirmaResponsable
Nombre y FirmaCarlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 9024980Responsable
Nombre y FirmaClave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1