

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Ovalle Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM185.33

15308899

WO-17305382

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	734
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290033HA
		SID GE:	SNT20290033HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	01-ago-25	9:30	01-ago-25	11:00
Fin del servicio:	1 de agosto de 2025			

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4927658

SINTOMA	
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Se realiza inspeccion de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, calibracion, pruebas de seguridad electrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio

Servicio realizado de acuerdo a documento: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL -2109358-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

SI ✓
SI ✓

Observaciones

01 AGO 2025

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Kit y refacciones utilizadas en el servicio	No. Orden / No. de GON
		Descripción	
		No Aplica	

Sello de Unidad
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205-0214-2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio



EJP. Cecylia Ines

Ornelio López Mat. 99022217

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS

GE Healthcare

01 AGO 2025

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290033HA

SW Ver:

Instalación
Preventivo



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Caso:

WO:



Inspección visual

	Pasa	N/A	Falla
Cable de AC	☒	☐	☐
Carcasa y pantalla	☒	☐	☐
Módulos y periféricos	☒	☐	☐
Cables y accesorios	☒	☐	☐

Pruebas funcionales

	Pasa	N/A	Falla
Secuencia de encendido	☒	☐	☐
Configuraciones y hora	☒	☐	☐
Prueba de pantalla táctil	☒	☐	☐
Detección de módulos	☒	☐	☐
Teclado y perilla	☒	☐	☐
Alarma audible	☒	☐	☐
Alarma visual (LED)	☒	☐	☐
Estado de red MC / IX	☐	☒	☐
Log de errores	☒	☐	☐
Tendencias	☒	☐	☐
Impresora	☐	☒	☐
Estado de batería >15min	☒	☐	☐
Pruebas ECG	☒	☐	☐
Pruebas Temperatura	☒	☐	☐
Pruebas de PANI	☒	☐	☐
Pruebas de SPO2	☒	☐	☐
Pruebas de P. Invasivas	☐	☒	☐
Módulo respiratorio	☐	☒	☐

Modelo / NS:

Calibración de gases	☐	☒	☐
Prueba espirometría	☐	☒	☐
Línea de muestreo y D-Fend	☐	☒	☐

Seguridad eléctrica

Resistencia a tierra

Ohm	Ohm
0.11	< 0.2
μA	μA

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm	93.1	<300
Pol Norm, N abierto	214	<1000
Pol Rev, N abierto	213	<1000
Pol Rev	90.3	<300

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm	0.4	<100
Pol Norm, N abierto	113.2	<300
Pol Norm, G abierta	94.8	<300
Pol Rev, G abierta	96.3	<300
Pol Rev, N abierto	100.6	<300
Pol Rev	0.9	<100

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm	0.8	<10
Pol Norm, N abierto	0.7	<50
Pol Norm, G abierta	0.3	<50
Pol Rev, G abierta	0.7	<50
Pol Rev, N abierto	0.6	<50
Pol Rev		<10

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm	0	<50
Pol Rev	0	<50

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL	Aplica	N/A	Reemp
2069650-001 CPU Battery	☐	☒	☐

Equipo/herramienta de medición utilizado

Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	FLUKE	ES612	5989068	03 Oct 2025

Comentarios y registro de
módulos adicionales:

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ing. Miguel Arenas Moreno

Ingeniero
Nombre y Firma

EJP. Cecylia Ines
IMSS Orduño López Mat. 99022217


Responsable
Nombre y Firma

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Responsable
Nombre y Firma

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

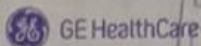

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Pda 4, Col. Santa Fe
Del Álvaro Obregón, C.P. 01230 CDMX
Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

RECEPCION
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Reporte fotográfico
MAM-BS-38

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

5308899

WO-17308382

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SNT20290033HA

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES


Modelo: CARESCAPE B450

Serie: SNT20290033HA


CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

AN
TE
R
S
V
I
D
C
E
I
O

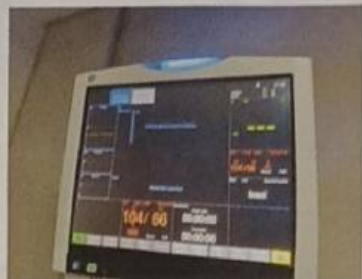

U
S
E
R
A
R
N
T
I
C
I
O

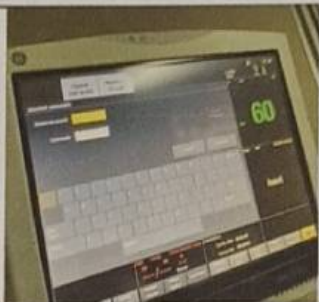

D
E
S
P
E
R
É
V
S
I
C
D
I
O
L



Observaciones

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

EJP. Cecylia Ines
Nombre completo

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Nombre completo
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

0205 0214 2902 <http://ecso.gehealthcare.com/>

H.G.R. No.1