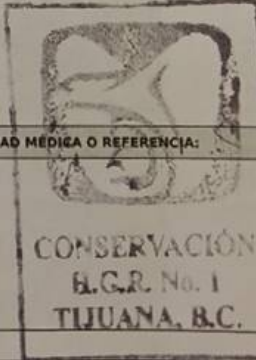


72003380

FECHA: 07-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA: 83915	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				ASESORÍA:		☐ DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				CAPACITACIÓN:		☒	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES:		☐ EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SE: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5531E		NO. SERIE: 692	
NO. INVENTARIO: 201500005714		SOFTWARE: 01-21		UBICACIÓN FÍSICA: Medicina interna		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		7 JUL 2025			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063 : PA-19, 00140. Numero de Serie Real del Equipo: 00692.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
07-07-25		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA: 07/07/25		NO. DE MATRÍCULA: 99024980		NO. DE MATRÍCULA: 99024980		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07-07-25		FECHA: 07-07-25		FECHA: 07-07-25		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 02-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003380

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE:


692

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO		✓	
	El desfibrilador no está sucio.		✓	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		✓	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		✓	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		✓	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		✓	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION		✓	
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		✓	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		✓	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		✓	
	El uso de un probador, compruebe que la tierra de protección.		✓	
3.	PALAS EXTERNAS		✓	
	Las palas externas no están rotos.		✓	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS		✓	
	Los conectores no están dañados o agrietados.		✓	
	Adaptador Pad no ha caducado.		✓	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA		✓	
	No hay daños o grietas y sin etiquetas se retiran o se desgarran.		✓	
	La batería no ha caducado.		✓	
6.	TEST DE BATERIA		✓	
	Realizar el test de la batería.		✓	
7.	ENCENDIDO		✓	
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		✓	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION		✓	
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		✓	
9.	IMPRESORA		✓	
	La impresora funciona correctamente.		✓	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		✓	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		✓	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		✓	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		✓	26 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		✓	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR		✓	
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		✓	
11.	TIEMPO DE CARGA		✓	5 seg
	El tiempo de carga es de 5 segundos.		✓	
12.	FORMA DE ONDA		✓	
	La desfibrilación se realiza correctamente.		✓	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		✓	
13.	ENERGIA DESCARGADA		✓	
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2 J	✓	2 J
		3 J	✓	3 J
		5 J	✓	5 J
		7 J	✓	7 J
		10 J	✓	10 J

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025

CONSERVACION
HGR No. 1

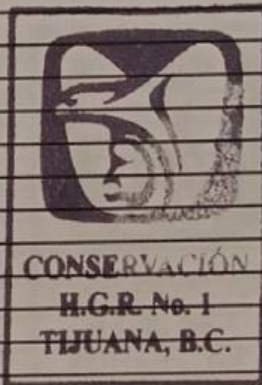

CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003380

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE:

692

DESCRIPCION DEL SERVICIO

REALIZÓ

✓/x

MEDICIÓN

Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	15 J		✓	15	J
	20 J		✓	20	J
	30 J		✓	30	J
	50 J		✓	50	J
	70 J		✓	70	J
	100 J		✓	100	J
	150 J		✓	150	J
	200 J		✓	200	J
	270 J		✓	270	J

Funcionamiento con la batería 270 J


14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES

La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J

✓ 270 J

15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS

La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		✓	2	J
	3 J		✓	3	J
	5 J		✓	5	J
	7 J		✓	7	J
	10 J		✓	10	J
	15 J		✓	15	J
	20 J		✓	20	J
	30 J		✓	30	J
Ajuste HV DC*	50 J		✓	50	J
	2 J ± 0.5 J		✓	2	J
	3 J ± 1 J		✓	3	J
	5 J ± 2 J		✓	5	J
	7 J ± 2 J		✓	7	J
	10 J ± 2 J		✓	10	J
	20 J ± 10%		✓	20	J

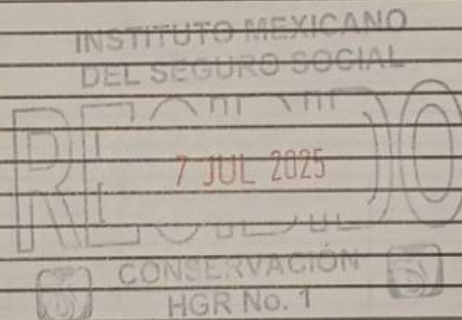

16. CAMBIO DE LA ENERGÍA

La energía cargada se puede cambiar

✓

17. DESCARGA INTERNA

La descarga interna se lleva a cabo correctamente.

✓

Capacitor de alta tensión (100%-80%)*

✓ 100 %

18. CARDIOVERSION DESDE PALAS

La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.

✓

19. CARDIOVERSION DESDE ECG

La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.

✓

20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA

La FV se detecta correctamente.

✓

La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.

✓

La desfibrilación se realiza correctamente.

✓

21. PANTALLA AED

Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.

✓

22. VOZ AED

El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.

✓

23. MARCAPASOS FIJO



NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: 07-07-25 FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003380

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5531E NUMERO DE SERIE: 692

		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
DESCRIPCION DEL SERVICIO			
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.		/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA		/	
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente		/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS		/	100 mA
La salida de estimulación por marcapasos es correcta. 100 mA $\pm$ 10%		/	
26. MONITORIZACION DE ECG		/	60 bpm
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60		/	
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		/	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		/	
27. MONITORIZACION DE CO2		x	mmHg
Precisión de visualización para el valor de la tasa de respiración y el CO2 se confirma. 35 a 45 mmHg		x	
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		x	
28. MONITORIZACION DE SpO2		/	97 %
97% SpO2: 95-99% SpO2		/	
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.		/	80 %
80% SpO2: 78-92% SpO2		/	
70% SpO2: 66-74% SpO2		/	70 %
60 bpm SpO2: 55-65% bpm		/	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		/	
29. SEGURIDAD ELECTRICA		/	
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq$ 500 μ A	500 μ A	Fuga hacia el paciente tipo I
	Condición 1ra falla $\leq$ 1 mA	1 mA	(Tipo BF, DC)
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq$ 100 μ A	100 μ A	Fuga hacia el paciente tipo I
	Condición 1ra falla $\leq$ 500 μ A	500 μ A	(Tipo CF, DC)
30. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS		/	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.
*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

Dr. Jassón Fabián Almazán Bernal
Jefe de Medicina Interna
Mat. 97822326
HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA
07-07-25

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA
07-07-25

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
07/07/25

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1


CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"


SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	692	ORDEN DE SERVICIO: 72003380	CONS: 769

ANTES 2

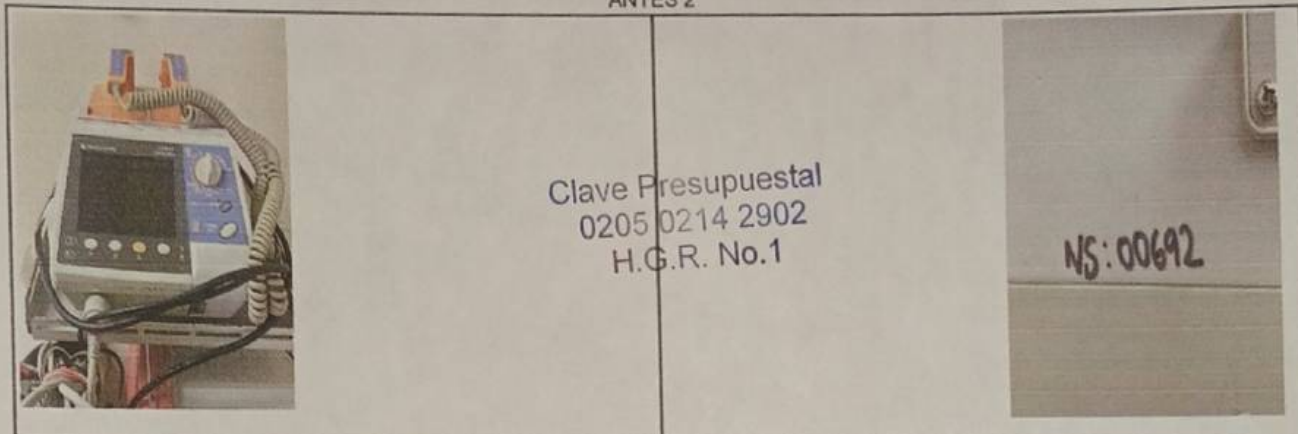

DURANTE 1

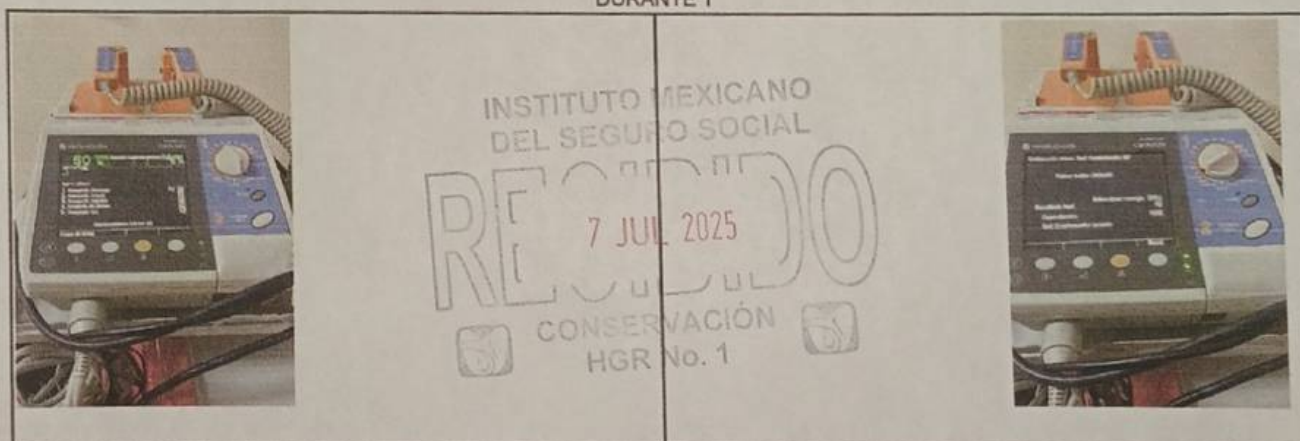

DESPUÉS 1



Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25