

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 09/03/2026

UNIDAD: UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLÍNICA DE MAMA

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

EQUIPO: MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SILENIA DIMENSIONS AVIA 20 3000

SERIE: SDM111800598

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI NO

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | ☒ | REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO |
| 2 | ☒ | SOPLETEO DE TARIETAS |
| 3 | ☒ | INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO |
| 4 | ☒ | INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL |
| 5 | ☒ | ORTENCION DE LOG FILE Y BACK UP |
| 6 | ☒ | REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION |
| 7 | ☒ | REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA |
| 8 | ☒ | REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS |
| 9 | ☒ | REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR |
| 10 | ☒ | REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X |
| 11 | ☒ | REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO |
| 12 | ☒ | REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO |
| 13 | ☒ | EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR |
| 14 | ☒ | REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR |
| 15 | ☒ | REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS |
| 16 | ☒ | SOPLETEO DE COLIMADOR |
| 17 | ☒ | REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES |
| 18 | ☒ | REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA |
| 19 | ☒ | VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION |
| 20 | ☒ | VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO |
| 21 | ☒ | REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS |
| 22 | ☒ | PIXEL MAP |
| 23 | ☒ | PRUEBAS DE ENVIO DE IMÁGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS |
| 24 | ☒ | PRUEBAS FINALES |
| | ☒ | EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100% |

IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA

09 MAR 2026

RECIBIDO

IMSS DELEGACIÓN DE TAJA CALIFICADA



IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.



CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO 09 MAR 2026

CONSERVACIÓN HGR No. 1

OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DA EL EQUIPO:



FUNCIONAMIENTO CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE SERVICIO



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

ING. VRANI SOTO CACHÓN

ING. DE SERVICIO SMH

INGENIERO/TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

IMSS UDDCM - CLINICA DE MAMA

Cód. Prof. 7535327 Mat. 09266582

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

SMH

OFICINA SERVICIO TÉCNICO: DIAGONAL # 29 COL. DEL VALLE C.P. 03100
TEL.: 01 (55) 56 87 - 61 64, 66, 55, 75 e-mail servicio@smh.com.mx
SUC. GUADALAJARA: TEL.: (33) 3123 - 1563 TEL/FAX (33) 3123 - 136

09/03/2026



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 09/03/2026

UNIDAD UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑIA SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No 87348

TIPO DE SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO



RAYOS X



MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131800598

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS DE 1 EN 1 KVP.



B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO



C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.




D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.



E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA



F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%

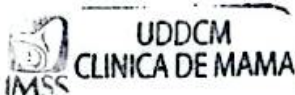

09 MAR 2026

RECIBIDO

ISS DELEGACION EN BAJA CALIFORNIA



IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA TIJANA, B.C.



CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJANA, B.C.

ING. VRANI SOTO
NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
DIRECTOR
IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582
NOMBRE Y FIRMA
TÉCNICO / JEFE DE AREA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
NOMBRE Y FIRMA
CONSERVACIÓN / BIOMEDICA

RECIBIDO
09 MAR 2026

CONSERVACIÓN HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.



FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

№ 87348

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
9	3	26	CSCDYB017A109135-232-20				

CLIENTE	<u>Unidad de detección y diagnóstico Clínica de...</u>		INGENIERO	<u>VSC</u>
DIRECCION	<u>Carril #16801</u>	POBLACION	<u>Puerto Calific...</u>	INGENIERO
TELEFONO	<u>669-173-2405</u>	FAX		INGENIERO
				INGENIERO

EQUIPO	<u>Muebanza</u>	MARCA	<u>Hologic</u>	REPORTE	<u>P- 4524</u>
MODELO	<u>Strong Dimensions Avia</u>	SERIE	<u>CL4131500572</u>	COTIZACION	

[illegible]

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L	10:00	—	15:00	5	7	7/3/26
M						
M						
J						
V						
S						
RECIBIDO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 09 MAR 2026 BOLETOS DE AVION \$ BOLETOS DE CAMION \$ VIATICOS \$ CONSERVACION \$ UCD No. 1					7	1

MATERIAL DE CONSUMO		
CANTIDAD	DESCRIPCION	CATACLO
1	11-40, Cose de lino, list de lino, list de lino, list de lino	CONSERVACIÓN
	11-40, Cose de lino, list de lino, list de lino, list de lino	H.G.R. No. 1
	11-40, Cose de lino, list de lino, list de lino, list de lino	TJUAN, D.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

 9/3/26 NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	 DIRECTOR UDDCM - CLÍNICA DE MAMA Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582 NOMBRE DEL RESPONSABLE	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1 FIRMA DEL RESPONSABLE	 Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980 DEPTO. DE MANTENIMIENTO
---	---	--	---

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100 TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE