

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

N° de Orden

AB0099-1842

Fecha

4-jul.-25

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

Localidad

TIJUANA

Tipo de Mantenimiento

1er Mantenimiento Preventivo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0012

Marca: DRÄGER

No. Prod: AB0099 Inventario: 200400069006

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: VENTILADOR VOLUMETRICO

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:

Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2939

- El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional.
- La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matricula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99924980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

4-jul.-25

Firma

Pedro Garcia

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matricula

Fecha

Firma

Dra. Claudia C. Osuna Saucedo
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11048296
C.R. 4964301
Coordinación de Pediatría HGR

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre


Fecha

Firma


Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal

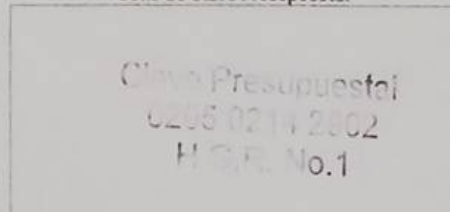

Sello Firmador

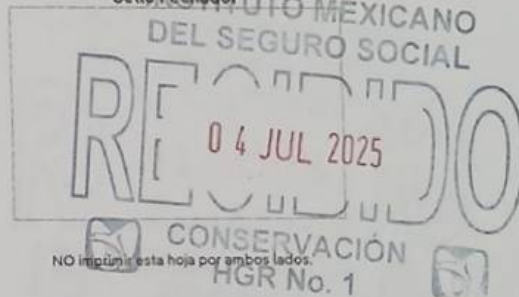

German Centre
Av. Santa Fe, 170
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 2210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amari C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0012

No. Orden: AB0099-1842


Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento

REF 8409200-42
SN ARUK-0012
V- 100-127
A 1.4-1.2Hz 50 / 60
Opt. SW 5.01 LFT
HFV PSV
8409200-42ARUK-0012
Made in Germany 2004
Dräger Medical AG & Co. KGaA
23542 Lübeck, Germany



Fotos durante el Mantenimiento

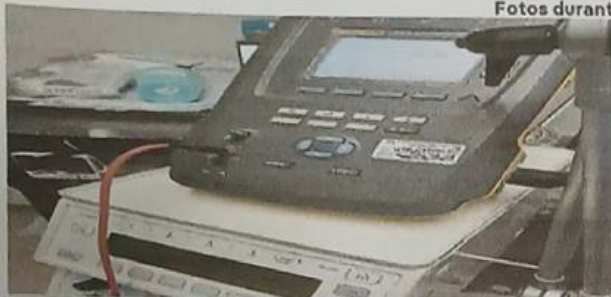

Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación

(En caso de no tener sello o tener datos erróneos el sello, poner los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Tijuana 09024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Pedro Garcia Chacon



4-jul.-25

Pedro Garcia

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador

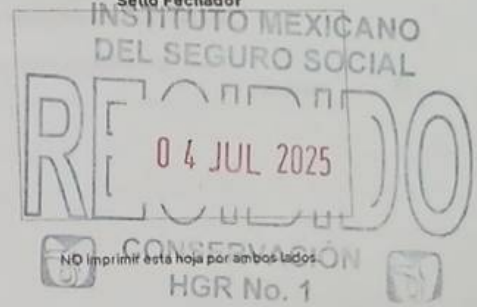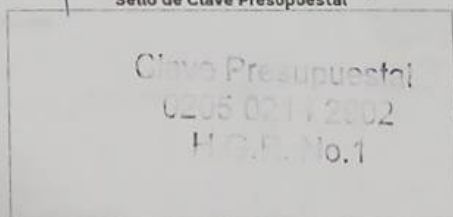

German Centre
Av. Santa Fe, 070
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Amerl C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0099-1842

ID Actividad de Servicio:
B324971B-8B48-4858-899F-23C4C00B5B91

Babylog 8000

Funcional

Número de Inventario:
200400069006

Número de Serie:
ARUK-0012

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacón

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
03-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		3.3.4 "+" Advertencia "¿Tubo bloqueado?"	
1.2 Número de la versión de software		+ Advertencia ¿Tubo bloqueado?	Funcional
Números de versión de software	5.01	3.3.5 Advertencia de presión de las vías aéreas baja	
1.3 Horas de funcionamiento		Advertencia de presión de las vías aéreas baja	Funcional
Horas de funcionamiento	60798 h	3.3.6 Advertencia de presión de las vías aéreas alta	
1.4 (Opción) Comunicación (disponible: SI/No)		Advertencia de presión de las vías aéreas alta	Funcional
Comunicación (disponible: si/no)	No	3.3.7 Advertencia de fallo de O2 y AIR	
1.5 (Opción) HFV (disponible: SI/No)		Las advertencias de fallo de O2 y AIR funcionan.	Funcional
HFV (disponible: si/no)	SI	3.3.8 Prueba de hermeticidad	
1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: SI/No)		Prueba de hermeticidad	Funcional
PSV / VG (disponible: si/no)	SI	3.3.9 Advertencia de fallo de la tensión de red / salvaguardia de datos	
3 Prueba de funcionamiento y de estado		Advertencia de fallo de la tensión de red/salvaguardia de datos	Funcional
3.1 Pruebas de estado		3.3.10 Introducción de los parámetros específicos del usuario	
3.1.1 Documentos adjuntos		Introducción de los parámetros específicos del usuario	Funcional
Estado comprobado.	Funcional	4 Seguridad eléctrica	
3.1.2 Aparato		4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)	
El aparato y sus piezas no están dañados.	Funcional	4.1.1 Examen visual	
3.1.3 Carro		Estado comprobado	Funcional
El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas.	Funcional	4.1.2 Resistencia de tierra de protección	
3.1.4 Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)		Máximo valor medido.	0.189 Ohm
Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)	Funcional	4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
3.2 Pruebas de funcionamiento		Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.2.1 Válvula de respiración de emergencia D3.1		4.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Válvula de respiración de emergencia D3.1	Funcional	Valor de referencia	157.6 µA
3.2.2 Válvula de seguridad inspiratoria Y3.3		Comprobación de repetición	157.3 µA
Prueba 1 (comportamiento de prueba del Babylog)	Funcional	4.3 Medidas finales	
3.2.3 "+" Calibración del sensor de flujo		4.3.1 Entrega del aparato	
+ Calibración del sensor de flujo	Funcional	Entrega del dispositivo	Funcional
3.3 Funciones en el modo de funcionamiento		5 Medios de comprobación	
3.3.1 IPPV		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria	
IPPV	Funcional	5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
3.3.2 CPAP		Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional
CPAP	Funcional		
3.3.3 "+" Límites de advertencia del volumen minuto (MV)			
+ Límites de advertencia del volumen minuto (VM)	Funcional		

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026



Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó **completo**. Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.

Lista de Participantes Entrenamiento / Asesoría

Dräger

Equipo(s)	VENTILADOR VOLUMETRICO	Fecha	4-jul.-25
Modelo	BABYLOG 8000		
Marca	DRÄGER		
Hospital	HGR No. 1	Entrenador	Pedro Garcia Chacon
Localidad	TIJUANA	Puesto	Ingeniero de Servicio
Delegación	BAJA CALIFORNIA	Firma	

Participantes

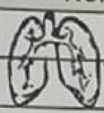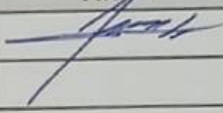No.	Nombre	Cargo	Matricula	Firma
1	 Inhaloterapia			
2	Sergio Flores Guerrero			
	Mat. 99026473			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				