

# Orden de Servicio IMSS

# Dräger

## Unidad Medica

HGR No. 1

## COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

## Localidad

TIJUANA

## N° de Orden

AB0099-C002

## Fecha

11-dic.-25

## Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

## Tipo de Mantenimiento

C. Mantenimiento Correctivo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0012

Marca: DRÄGER

No. Prod: AB0099

Inventario: 200400069006

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: VENTILADOR VOLUMETRICO

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

## Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparacion por mejora, se instala tapa de perillas de parámetros.

## Incidencias:

SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3268

\* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, 100% Funcional

\* La asesoría técnica no fue requerida.

\* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

## Material Utilizado.

| No. | Cant | No. Parte | Descripción                 | No. Serie | No. | Cant | No. Parte | Descripción | No. Serie |
|-----|------|-----------|-----------------------------|-----------|-----|------|-----------|-------------|-----------|
| 1   | 1    | 8418046   | CHARALETA BABYLOG 8000 PLUS | No aplica | 9   |      |           |             |           |
| 2   |      |           |                             |           | 10  |      |           |             |           |
| 3   |      |           |                             |           | 11  |      |           |             |           |
| 4   |      |           |                             |           | 12  |      |           |             |           |
| 5   |      |           |                             |           | 13  |      |           |             |           |
| 6   |      |           |                             |           | 14  |      |           |             |           |
| 7   |      |           |                             |           | 15  |      |           |             |           |
| 8   |      |           |                             |           | 16  |      |           |             |           |

## Horas de Trabajo.

| Cantidad | No. Parte | Descripción  |
|----------|-----------|--------------|
| 1        | M         | Mano de Obra |
| 0        | T         | Traslado     |
| 0        | E         | Espera       |

## Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

## Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

11-dic.-25

Firma

## Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

## Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

## Sello de Unidad




CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

## Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No 1

## Sello Fechador

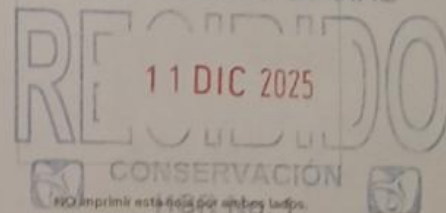

Gerencia Centro  
Av. Santa Fe, 1709, 5-4-4  
Col. Lomas de Santa Fe  
C.P. 06030, CDMX

Oficina Guadalajara  
José Guad. Col. Americana  
Col. Antel. C.P. 44140 Guadalajara, Jal.  
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

# Orden de Servicio IMSS

**Dräger**

## Unidad Medica

HGR No. 1

## OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

## Localidad

TIJUANA

## Datos del Equipo


Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0012

No. Orden: AB0099-C002

Con número de serie

## Fotos antes del Mantenimiento

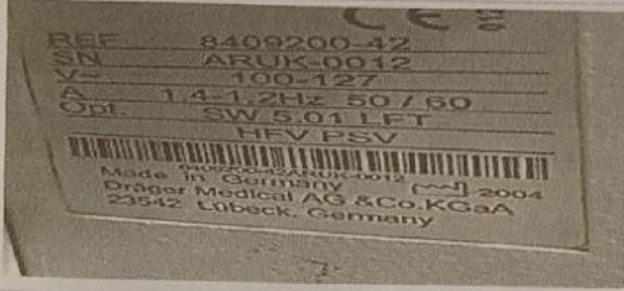

## Fotos durante el Mantenimiento



## Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



## Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener el sello, el jefe de conservación debe firmar y sellar la parte inferior del formulario)

Nombre: Subjefe de Conservación

Puesto: H.G.R. No. 1

Matricula: IMSS Mat 99024980

Fecha:

Firma:

## Datos Ingeniero Dräger.

Nombre:

Pedro Garcia Chacon

Fecha:

11-dic.-25

Firma:

*[Firma]*

Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal



Sello Fechador



NO imprimir esta hoja por ambos lados.

### Certificado de Servicio

Nombre Cliente:  
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:  
AB0099-C002

ID Actividad de Servicio:  
1862D26B-E360-4211-976C-899C55FAB099

### Babylog 8000

### Funcional

Número de Inventario:  
200400069006

Número de Serie:  
ARUK-0012

Servicio Realizado por:  
García, Pedro

Localización:  
UCIN

Servicio Realizado el día:  
2025-12-11

| Prueba                                                                                              | Resultado | Prueba                                                                               | Resultado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Configuración del dispositivo                                                                     |           | 4 Seguridad eléctrica                                                                |           |
| 1.1 Números de serie                                                                                |           | 4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)          |           |
| 1.1.1 Válvula de espiración 1                                                                       |           | 4.1.1 Examen visual                                                                  |           |
| Válvula de espiración n.º 1                                                                         | ARUK-0084 | Estado comprobado                                                                    | Funcional |
| 1.2 Número de la versión de software                                                                |           | 4.1.2 Resistencia de tierra de protección                                            |           |
| Números de versión de software                                                                      | 5.01      | Máximo valor medido                                                                  | 0.189 Ohm |
| 1.4 (Opción) Comunicación (disponible: Si/No)                                                       |           | 4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección                   |           |
| Comunicación (disponible: si/no)                                                                    | No        | Los puntos de medición se han explorado                                              | Funcional |
| 1.5 (Opción) HFV (disponible: Si/No)                                                                |           | 4.1.4 Corriente de fuga del equipo                                                   |           |
| HFV (disponible: si/no)                                                                             | Si        | Valor de referencia                                                                  | 189.0 µA  |
| 1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: Si/No)                                                           |           | Comprobación de repetición                                                           | 189.0 µA  |
| PSV / VG (disponible: si/no)                                                                        | Si        | 4.3 Medidas finales                                                                  |           |
| 3 Prueba de funcionamiento y de estado                                                              |           | 4.3.1 Entrega del aparato                                                            |           |
| 3.1 Pruebas de estado                                                                               |           | Entrega del dispositivo                                                              | Funcional |
| 3.1.1 Documentos adjuntos                                                                           |           | 5 Medios de comprobación                                                             |           |
| Estado comprobado                                                                                   | Funcional | 5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria |           |
| 3.1.2 Aparato                                                                                       |           | 5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria                             |           |
| El aparato y sus piezas no están dañados                                                            | Funcional | Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente                  | Funcional |
| 3.1.3 Carro                                                                                         |           |                                                                                      |           |
| El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas | Funcional |                                                                                      |           |

#### Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026  
Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.