

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

N° de Orden
AB0185-C002

Fecha
11-dic.-25

COAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
C. Mantenimiento Correctivo

Modelo:	BABYTHERM 8010	No. Serie:	ARRM-0069	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0185	Inventario:	2002905693	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	CUNA DE CALOR RADIANTE	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparacion por mejora, se instala parte superior e inferior del modulo de control y conector de sensores de temperatura.

Incidencias:
SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3266

- * El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional
- * La asesoría técnica no fue requerida.
- * El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	2M21957	PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA	No aplica	9				
2	1	2M21958	PARTE INFERIOR DE LA CARCASA	No aplica	10				
3	1	2M30308	TRONCO D.CABLES SENSOR	No aplica	11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto: Jefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: 11-dic-25
Firma: IMSS Mat. 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 11-dic.-25
Firma: [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: EJP Ayala Garcia Malia
Puesto: Mat. 11541873
Matrícula: 11-dic-25
Fecha: [Firma]
Firma:

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre:
Fecha:
Firma:



German Centeno
Av. Santa Fe 170 Int. 5
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0010, CDMX

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Oficina Guadalajara
José Ovid Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44180 Guadalajara, Jal.
C.P. 44180 Guadalajara, Jal.

Sello Fechador



NO Imprimir este formulario en blanco.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010


No. Serie: ARRM-0069

No. Orden: AB0185-C002

Con número de serie



Fotos antes del Mantenimiento

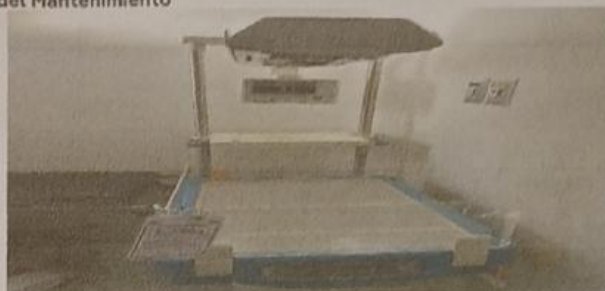

Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Pedro García Chacon

11-dic.-25

[Firma]

Sello de Unidad



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Oficina Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri. C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
11 DIC 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1
NO imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0185-C002

ID Actividad de Servicio:
75A63968-DD42-49CC-81C7-C4B2905CE471

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905893

Número de Serie:
ARRM-0069

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
Sala de expulsión

Servicio Realizado el día:
2025-12-11

Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo	
1.2 Versión del software	
Versión de software (Babytherm)	1.01
1.3 (Opcion) Fototerapia	
Fototerapia (horas de funcionamiento)	0
3 Seguridad eléctrica	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.1 Examen visual	
Estado comprobado.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.205 Ohm
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Valor de referencia de 100 V a 127 V	129.4 µA
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V	129.4 µA
4 Prueba de funcionamiento y de estado	
4.1 Pruebas de estado	
4.1.1 Documentos adjuntos	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional
4.1.4 Unidad de control y de regulación	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional
4.1.7 Paneles	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional

Prueba	Resultado
4.1.9 Radiador	
Radiador	Funcional
4.1.10 Varillas de calefacción	
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
4.1.11 Placa base	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
4.2 Pruebas de funcionamiento	
4.2.1 Superficie de reposo	
El enclavamiento en distintas posiciones es posible. La superficie de reposo encaja con seguridad y sin juego.	Funcional
4.2.3 Prueba de encendido	
Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
4.2.6 Radiador	
El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
Potencia de caldeo ajustable manualmente	Funcional
Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.2.12 (Opcion) Fototerapia	
Prueba de funcionamiento	Funcional
4.2.15 Medidas finales	
4.2.15. Entrega del aparato	
1 Entrega del dispositivo	Funcional
5 Medios de comprobación	
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026