

MC72000852

CDMS.

FECHA 15/05/2025		NO. REPORTE 2572-049		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO: ☐ USUARIO: ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTIA DE SERVICIO: ☐ REFACCIÓN: ☐ SERVICIO: ☐			
TEL. 6646270963				GARANTIA DE VENTA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐			
CONTRATO NO. 050GYR040T00424-010- COTIZACIÓN 00				ASESORIA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA: .							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI ☐		NO ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR MODULO DE CHAROLA PRINCIPAL							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA VIBRACION EN BANDEJA PARA PACIENTE							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: INCUBADORA DE TRASLADO		MARCA: SAPS		MODELO: ISOTERM SCALE		NO. SERIE: SC24-522	
NO. INVENTARIO: NA		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: Curios			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DEL SEGURO SOCIAL						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA VIBRACION EN BANDEJA PARA PACIENTE. SE PROCEDE A INSTALAR MODULO DE CHAROLA PRINCIPAL PARA EVITAR QUE LA BANDEJA PARA PACIENTE VIBRE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18-5579063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100%: ☒			
				FUERA DE SERVICIO: ☐			
				NO SE REALIZA SERVICIO: ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
		Dra. Claudia C. Osuna Saucedo		Ing. Javier Zamora Villalobos		CONSERVACIÓN	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Mat. IMSS 11003156		Mat. IMSS 11003156		Mat. IMSS 11003156		Mat. IMSS 11003156	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
C.P. 4500301		C.P. 4500301		C.P. 4500301		C.P. 4500301	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
Mat. 29020047		Mat. 29020047		Mat. 29020047		Mat. 29020047	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

FECHA: _____		FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003020</u>	
MODELO: SAPS Isotherm Scale		NÚMERO DE SERIE: <u>SC24-572</u>	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			REALIZÓ
			v/x MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES		/
2.	REALIZAR PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN		
2.1	VERIFICACIÓN MECÁNICA Y DE CONTROL		/
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN		/
	REVISAR ESTRUCTURA EXTERNA DEL EQUIPO PARA DESCARTAR DAÑO		/
	VERIFICAR SISTEMA MECÁNICO (TRASLADO Y MANIOBRAS CON PACIENTE)		/
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO/FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO LATERALES		/
	VERIFICAR QUE LAS RUEDAS DEL EQUIPO HACEN ADECUADO CONTACTO CON EL PISO, REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE FRENADO		/
	VERIFICAR Y PROBAR APERTURA Y CIERRE DE PANEL FRONTAL		/
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE SENSORES DE TEMPERATURA		/
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FÍSICO DE LA CHAROLA EXTRAIBLE		/
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL COLCHÓN		/
	VERIFICAR DEL ESTADO FÍSICO DE CONECTORES PARA SENSORES DE TEMPERATURA.		/
	VERIFICACION DEL ESTADO FISICO DEL PUERTO DE HUMIDIFICACION PARA OXIGENO NASAL		/
	VERIFICACION DEL ESTADO FISICO DEL PUERTO DEL PUERTO DE ENTRDA DE OXIGENO		/
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL PANEL DE MEMBRANA DE LA UNIDAD DE CONTROL, PERILLAS Y DISPLAY DE DATOS		/
	VERIFICACION DEL MECANISMO DE ELEVACION		/
2.2	VERIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS		
	TARJETAS ELECTRÓNICAS		/
	COMPONENTES ELECTRONICOS		/
2.3	VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO		
	PRUEBA DE BATERÍA (Mínimo 2 hrs.)		/
	VERIFICAR DESPLIEGE DE TENDENCIAS (24, 48, 72 HRS.)		/
	FUNCIONAMIENTO DEL SERVOCONTROL DE TEMPERATURA		/
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE EXPLORACION		/
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMA SONORA		/
	VERIFICAR Y AJUSTAR QUE LA SELECCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA SE ACTIVEN AL NIVEL DESEADO.		/
3.	REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO		/
4.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA		/
		v/x	v/x

	CORRIENTE DE FUGAS	/	0.1 μ A	VOLTAJE DE LINEA	/	122 V	RESISTENCIA A TIERRA	/	0.38 Ω	
5.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL								/	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Ing. Dayan Hernandez Valencia
REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

Ing. Juan Carlos
USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Ing. Javier Zandora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	SC24-522	O.S.:	72003020
CONTRAT	O:	050GYR040T00424-010-00	

FOTO NO. SERIE


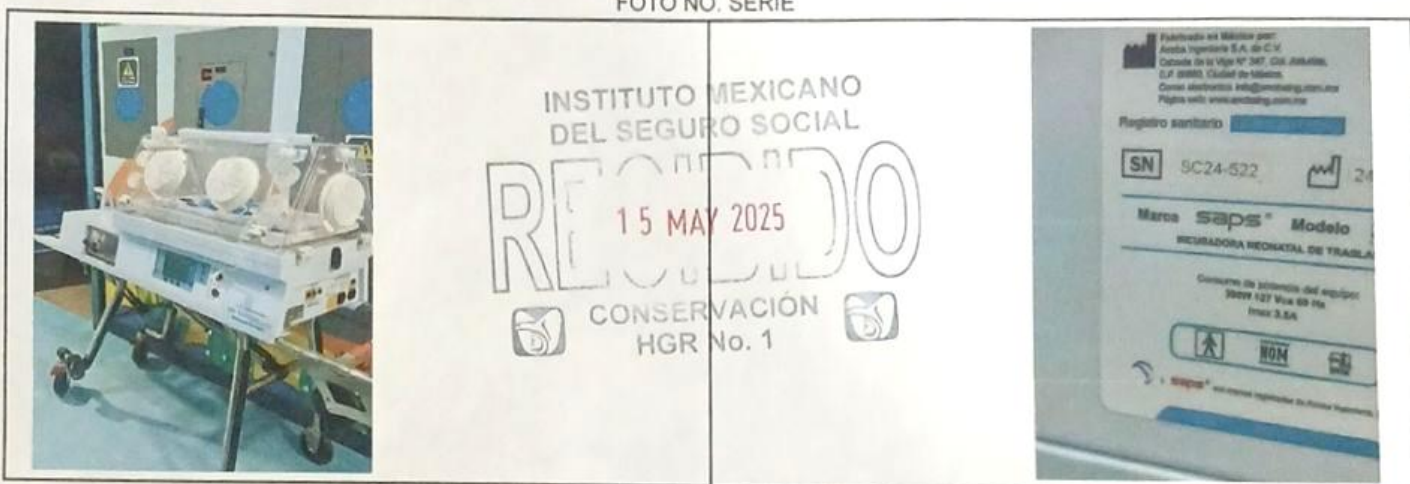


FOTO DURANTE



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Ing. Javier Zamora Villalobos
 Jefe de Conservación
 Hospital General Regional No. 1
 Mat. 29020041

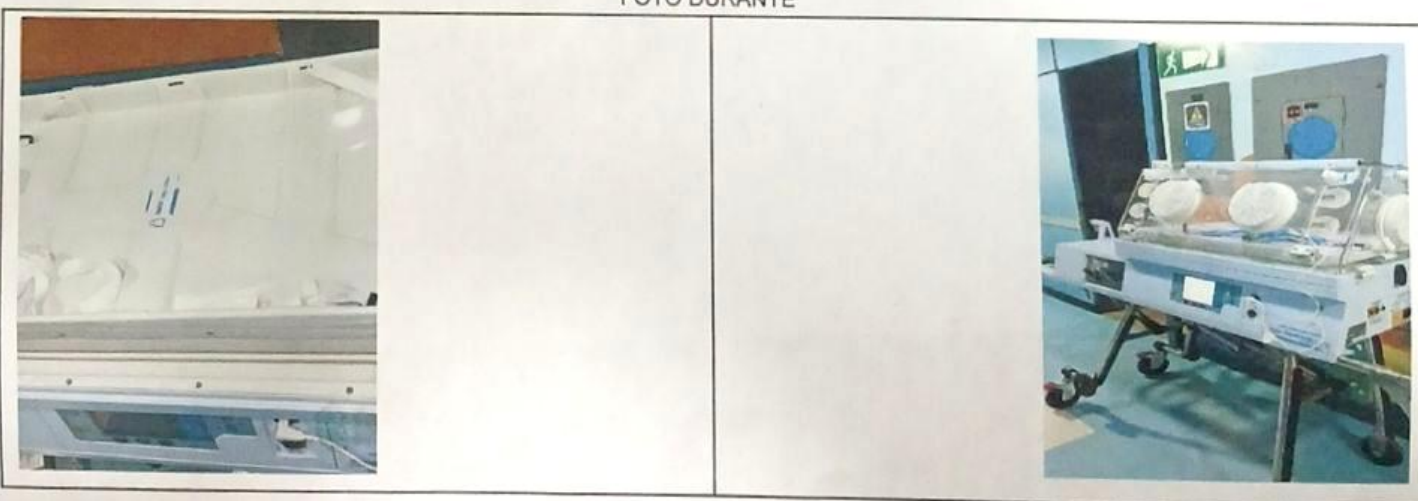