



Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados S.A. de C.V.  
Av. Paseo de las Palmas 1345 Int. 1 Col. Lomas de Chapultepec II Sección  
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11000  
RFC: SVIO60914I96  
E-mail: servicio@sevime.com Teléfono: (55) 5202 9151

## ORDEN DE SERVICIO

|                                                                                                     |            |                                |               |              |                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre del cliente o Institución                                                                    |            |                                |               |              | Orden de servicio |                                                    |
| HGR # 1, Tijuana                                                                                    |            |                                |               |              | 23504             |                                                    |
| Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California |            |                                |               |              |                   |                                                    |
| Email:                                                                                              |            |                                | Teléfono:     |              | Fecha             |                                                    |
| IMSS-                                                                                               | ISSSTE     | SSA                            | GOB. Del EDO. | PRIVADO      | Nov 2025          |                                                    |
| Tipo de servicio / Mantenimiento                                                                    |            |                                |               |              | Datos del equipo  |                                                    |
| Preventivo-                                                                                         | Correctivo | Instalación y Puesta en Marcha | Entrega       | Capacitación | Nombre:           | Ultrasonógrafo. (gineco-obstétrico segundo nivel). |
| Falla reportada                                                                                     |            |                                |               |              | Marca:            | PHILIPS                                            |
|                                                                                                     |            |                                |               |              | Modelo:           | AFFINITY 50                                        |
|                                                                                                     |            |                                |               |              | No. Serie:        | USO24D1836                                         |
|                                                                                                     |            |                                |               |              | Localización:     |                                                    |
|                                                                                                     |            |                                |               |              | Contrato:         | 050GYR040T00424-021-00                             |
| Hora de Inicio:                                                                                     |            | Hora de finalizado:            |               | Inventario:  |                   |                                                    |

### Descripción del trabajo realizado

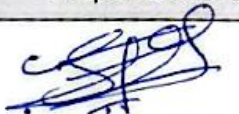
- SE PRESENTA PERSONAL A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE
- SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL PARA DETERMINAR EL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO
- SE REALIZAN PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO (HARDWARE Y SOFTWARE)
- SE REVISAS LOG DE ERRORES PARA DESCARTAR FALLAS EN EL SISTEMA
- SE REVISAS CONEXIÓN A PAC S
- SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES: ENDOCAVITARIO, LINEAL, VOLUMÉTRICO Y CONVEXO
- SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (FILTROS, Y CABEZALES)
- SE REVISAS FUNCIONAMIENTO DE UPS
- SE REALIZAN PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO
- SE ENTREGAN MANUALES: "CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE ULTRASONIDO Y TRANSDUCTORES" Y "DESINFECTANTES Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA SISTEMAS DE ULTRASONIDO Y TRANSDUCTORES"

### EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Se recomienda realizar el cuidado y la manipulación adecuados de los transductores de ultrasonido, lo que implica su inspección regular, limpieza, y desinfección o esterilización según corresponda. Estos procedimientos deben efectuarse siempre conforme a las indicaciones del fabricante. El incumplimiento o la aplicación incorrecta de estas prácticas puede ocasionar daños al equipo y anular su garantía.

Es importante que el personal de ingeniería de la unidad médica revise y limpie el filtro de aire al menos una vez por semana, o bien, realice su limpieza como mínimo cada quince días. La frecuencia de esta actividad dependerá también de la recirculación del aire en la sala. La omisión de dicha limpieza puede provocar sobrecalentamiento del equipo y, a largo plazo, daño en el equipo.

| No. Parte | Descripción | Cantidad |
|-----------|-------------|----------|
|           |             |          |
|           |             |          |
|           |             |          |
|           |             |          |
|           |             |          |

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable de servicio                                                                                       |
| <br>Carlos Fernando Torres |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Autorizado<br>(Nombre, firma y cargo)                                                                                                                                     |
| <br>Carlos Oswaldo Ramírez González<br>Subjefe de Conservación<br>H.B.R. No. 1<br>Mat. 99024980 |

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario<br>(Nombre, firma y cargo)                                                                                                                                                                                         |
| <br>Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera<br>Médico Radiólogo<br>Jefatura de Imagenología HGR1<br>Cec. Est. 11200599<br>Mat. 93024465 |



# PHILIPS

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO  
07 NOV 2025

CONSERVACION  
HGR No. 1

Página: 1/1

## Reporte de Servicio

Orden de Servicio: WO-12073446

Número de Documento: WO-12073446\_1  
Fecha de Emisión: 28/12/2025

Número de Caso: 0124843274

### Detalles de Contacto:

Teléfono: 01 800 253 0448 / 1 253 2570

Vendido a:  
No aplica

Enviado a:  
No aplica

### DETALLES DEL CLIENTE

Contacto: Melissa Montserrat Méndez Barba  
Email: mmendez@hcg.gob.mx

Teléfono: +52 3318372229  
Celular: No aplica

### DETALLES DEL SERVICIO

Ingeniero: Daniel García  
Fecha de creación: No aplica  
Prioridad: 5-Actividad Programada  
Tipo de Evento: Mantenimiento Preventivo

Número de Contrato: No aplica  
Plan de Servicio: No aplica  
Garantía: WN-8065161

### DETALLES DEL EQUIPO

Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System 795208  
No. de Equipo: No aplica  
Número de Inventario de Cliente: No aplica

Número de Serie: USO24D1836  
Techidno: No aplica  
UDI: (01)00884838114173(21)USO24D1836

Situación Reportada: Mantenimiento Preventivo

Estado del Equipo: Mantenimiento Preventivo finalizado, el equipo queda completamente operativo.

### DETALLE DE TAREAS

| Tipo de actividad | Actividad de Servicio | Fecha y hora de Inicio | Fecha y hora de Fin | Duración (en horas) |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Trabajo           | Servicio en Sitio     | 07/11/2025 12:01 PM    | 07/11/2025 02:00 PM | 1.98                |
| Duración Total:   |                       |                        |                     | 1.98                |

Firma del Representante de Philips:

Firma del Cliente:

Carlos Oswaldo Ramirez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS MEX 00074080

Ingeniero: García, Daniel  
Fecha: 28/12/2025 2:58 PM  
Firma realizada

Nombre del Cliente: Carlos Ramirez  
Fecha:  
Firma física requerida

Orden de Servicio: WO-12073446



# PHILIPS

Ubicación:  
HGR NO 1  
Canada 16801  
Tijuana  
Mexico

## Reporte de Prueba y Verificación

Número de Caso: 0124843274  
Orden de Servicio: WO-12073446

### DETALLES DEL SERVICIO

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia  
Estado del Equipo: Pass

### INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System  
Código del Equipo: 795208



Tipo de Evento: Predictive / Preventative Maintenance  
Actividad de Servicio: Preventative Maintenance

Número de Serie: USO24D1836  
Número de Equipo: 114984468  
UDI: (01)00884838114173(21)USO24D1836

| Min | Max | UoM | Resultado | Conclusión | Comentarios |
|-----|-----|-----|-----------|------------|-------------|
|-----|-----|-----|-----------|------------|-------------|

## Planned Maintenance

### System Information

|                  |         |
|------------------|---------|
| Software Version | 10.0.15 |
| Hardware Version | B.0     |

### Inspection & Cleaning

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Query Customer Performance Issues                                                     | Pass |
| Inspect Exterior Periph. & Power Cords.                                               | Pass |
| Inspect & Clean Trackball                                                             | Pass |
| Inspect & Clean Monitor                                                               | Pass |
| Inspect/Clean Control Panels & Keyboard                                               | Pass |
| Inspected and cleaned the transducer connector assembly (transducer and system side)? | Yes  |
| Footswitch, Key- & Remote Control Pad                                                 | Pass |
| Inspect Casters & Brakes Operation                                                    | Pass |
| Clean/Check System Filters & Fans                                                     | Pass |
| Check Articulation motion. (monitor, etc)                                             | Pass |
| Check System Battery                                                                  | Pass |

### Performance & Peripherals

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Execute Full Set of System Diagnostics    | Pass |
| Check, Download & Clear Logs              | Pass |
| Perform Hard-disk Maintenance             | Pass |
| Backup of System Settings and Configs.    | Pass |
| Check Operation All User Ctrl's. & Lights | Pass |



|                                                                                                                | Min  | Max     | UoM | Resultado | Conclusión     | Comentarios |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|----------------|-------------|
| Planned Maintenance                                                                                            |      |         |     |           |                |             |
| Performance & Peripherals                                                                                      |      |         |     |           |                |             |
| Check Operation of Major Applications                                                                          |      |         |     |           | Pass           |             |
| Test Printers                                                                                                  |      |         |     |           | Not Installed  |             |
| Check Operation Dig. Recording Devices                                                                         |      |         |     |           | Not Applicable |             |
| Philips Remote Service related Checks                                                                          |      |         |     |           |                |             |
| Is system connected to PRS (Philips Remote Service)?                                                           |      |         |     |           | Yes            |             |
| Automatic Export of Log File Configured                                                                        |      |         |     |           | Yes            |             |
| System Safety General                                                                                          |      |         |     |           |                |             |
| Protective Earth resistance ( $\leq 200$ mOhm)                                                                 | 200  | mOhm    | 0   |           | Pass           |             |
| Earth Leakage Current. NC. Highest val. ( $\leq 500$ $\mu$ A)                                                  | 500  | $\mu$ A | 0   |           | Pass           |             |
| Earth Leakage Current. SF. Highest val. ( $\leq 1000$ $\mu$ A)                                                 | 1000 | $\mu$ A | 0   |           | Pass           |             |
| Touch Current 'Normal Condition' ( $\leq 100$ $\mu$ A)                                                         | 100  | $\mu$ A | 0   |           | Pass           |             |
| Touch Current - Single fault condition ( $\leq 500$ $\mu$ A)" - Record higher value between Normal and Reverse | 500  | $\mu$ A | 0   |           | Pass           |             |



CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1



Philips Representative Signature:

*DA*

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Fecha: Dec 28, 2025

Carlos Oswaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
Mat 20074980

