



Reporte de Servicio

Orden de Servicio: WO-12073567

Número de Documento: WO-12073567_1
Fecha de Emisión: 28/12/2025

Número de Caso: 0124843392

Detalles de Contacto:

Teléfono: 01 800 253 0448 / 1 253 2570

Vendido a:
No aplica

DETALLES DEL CLIENTE

Contacto: Melissa Montserrat Méndez Barba
Email: mmendez@hcg.gob.mx

Teléfono: +52 3318372229

Celular: No aplica

DETALLES DEL SERVICIO

Ingeniero: Daniel Garcia
Fecha de creación: No aplica
Prioridad: 5-Actividad Programada
Tipo de Evento: Mantenimiento Preventivo

Número de Contrato: No aplica

Plan de Servicio: No aplica

Garantía: WN-8065248

DETALLES DEL EQUIPO

Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System 795208
No. de Equipo: 114951007
Número de Inventario de Cliente: No aplica

Número de Serie: USO24D1841

Techidno: No aplica

UDI: (01)00884838114173(21)USO24D1841

Situación Reportada: Mantenimiento Preventivo

Estado del Equipo: Mantenimiento Preventivo finalizado, el equipo queda completamente operativo.

DETALLE DE TAREAS

Tipo de actividad	Actividad de Servicio	Fecha y hora de Inicio	Fecha y hora de Fin	Duración (en horas)
Trabajo	Servicio en Sitio	07/11/2025 02:15 PM	07/11/2025 04:30 PM	2.25
			Duración Total:	2.25

Firma del Representante de Philips:

Firma del Cliente:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. No. 0124843392

Ingeniero: Garcia, Daniel
Fecha: 28/12/2025 3:16 PM
Firma realizada

Nombre del Cliente: Carlos Ramirez
Fecha:
Firma fisica requerida

Orden de Servicio: WO-12073567

Ubicación:
HGR NO 1
Canada 16801
Tijuana
Mexico

Reporte de Prueba y Verificación

Número de Caso: 0124843392

Orden de Servicio: WO-12073567

DETALLES DEL SERVICIO

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Estado del Equipo: Pass

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System

Código del Equipo: 795208


Tipo de Evento: Predictive / Preventative Maintenance

Actividad de Servicio: Preventative Maintenance

Número de Serie: USO24D1841

Número de Equipo: 114951007

UDI: (01)00884838114173(21)USO24D1841

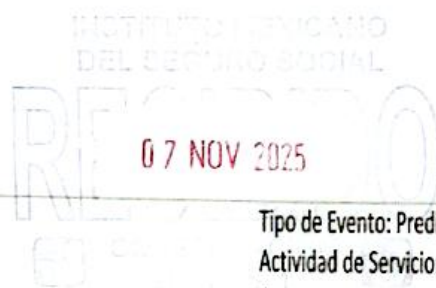

Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
-----	-----	-----	-----------	------------	-------------

Planned Maintenance

System Information

Software Version	10.0.15
Hardware Version	B.0

Inspection & Cleaning

Query Customer Performance Issues	Pass
Inspect Exterior Periph. & Power Cords.	Pass
Inspect & Clean Trackball	Pass
Inspect & Clean Monitor	Pass
Inspect/Clean Control Panels & Keyboard	Pass
Inspected and cleaned the transducer connector assembly (transducer and system side)?	Yes
Footswitch, Key- & Remote Control Pad	Not Installed
Inspect Casters & Brakes Operation	Not Applicable
Clean/Check System Filters & Fans	Pass
Check Articulation motion.(monitor, etc)	Pass
Check System Battery	Pass

Performance & Peripherals

Execute Full Set of System Diagnostics	Pass
Check, Download & Clear Logs	Pass
Perform Hard-disk Maintenance	Pass
Backup of System Settings and Configs.	Pass
Check Operation All User Ctrl's. & Lights	Pass

Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
-----	-----	-----	-----------	------------	-------------

Planned Maintenance

Performance & Peripherals

Check Operation of Major Applications	Pass
Test Printers	Not Installed
Check Operation Dig. Recording Devices	Not Applicable

Philips Remote Service related Checks

Is system connected to PRS (Philips Remote Service)?	Yes
Automatic Export of Log File Configured	Yes

System Safety General

Protective Earth resistance (≤ 200 mOhm)	200	mOhm	0	Pass
Earth Leakage Current. NC, Highest val. (≤ 500 μ A)	500	μ A	0	Pass
Earth Leakage Current. SF, Highest val. (≤ 1000 μ A)	1000	μ A	0	Pass
Touch Current 'Normal Condition' (≤ 100 μ A)	100	μ A	0	Pass
Touch Current - Single fault condition (≤ 500 μ A) - Record higher value between Normal and Reverse	500	μ A	0	Pass




Philips Representative Signature:

DA

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Fecha: Dec 28, 2025

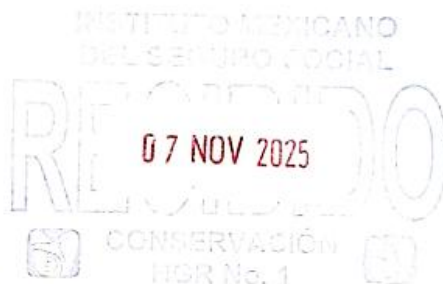

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS MEX 00004980

