



Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas 1345 Int. 1 Col. Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11000
RFC: SVI060914I96
E-mail: servicio@sevime.com Teléfono: (55) 5202 9151

**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1**

ORDEN DE SERVICIO

Nombre del Cliente o Institución HGR # 1 TULUANA					Orden de servicio N° 23343	
Email:		Teléfono:			Fecha	
IMSS X	ISSSTE	SSA	GOB. Del EDO.	PRIVADO		
Tipo de servicio / Mantenimiento					Datos del equipo	
Preventivo X	Correctivo	Instalación y Puesta en Marcha	Entrega	Capacitación	Nombre:	Ultrasonógrafo. (gineco-obstétrico segundo nivel).
Falla reportada					Marca:	Philips
N/A					Modelo:	Affiniti 50
					No. Serie:	USO24D1836
					Localización:	
					Contrato:	050GYR040T00424-021-00
Hora de Inicio:		Hrs.	Hora de Finalizado:	Hrs.	Inventario:	

Descripción del trabajo realizado	
• SE PRESENTA PERSONAL A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE	
• SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL PARA DETERMINAR EL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO	
• SE REALIZAN PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	
• SE REVISAS LOG DE ERRORES PARA DESCARTAR ALGUNA FALLA EN EL SISTEMA	
• SE REVISAS CONEXIÓN A PAC'S	
• SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES (ENDOCAVITARIO, LINEAL, VOLUMÉTRICO Y CONVEXO)	
• SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (FILTROS, Y CABEZALES)	
• SE REVISAS FUNCIONAMIENTO DE UPS	
• SE REALIZAN PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA, SE UTILIZA ANALIZADOR FLUKE ESA602	
• SE REALIZAN PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	
EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	



No. Parte	Descripción	Cantidad

Responsable de servicio

Personal Autorizado (Nombre, firma y cargo)
 Suplente de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 98024980

Usuario (Nombre, firma y cargo)

Orden de Servicio Philips Healthcare

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
27 JUN 2025



HMX-REG-CS-06

PHILIPS

Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System
Número de Identificación (ID): 114984468
Modelo: Affiniti 50 Ultrasound System
Número de Serie: USO24D1836

Orden de Servicio: Tijuana, B.C.
Tipo de Servicio: PREVENTIVO
Equipo operando: Si ☒ No ☐
Número de Contrato: WN-8065161

Nombre del cliente: HGR NO 1
Dirección: Canada 16801, 22226, Tijuana, Baja California, Mexico

Teléfono:
Descripción de la Falla:

Mantenimiento Preventivo

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo, la cual consta principalmente de limpieza general del equipo así como de lubricación, calibración a los módulos que lo ameriten, actividades en el listado adjunto

Observaciones:

Equipo trabajando bajo parámetros esperados

Actividades

Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	Inicio	Fin	Duración
PMAI	Planned Maintenance	27/06/2025	11:00	13:00	02:00 Hrs.
-----	-----	--/--	--:--	--:--	----
-----	-----	--/--	--:--	--:--	----
-----	-----	--/--	--:--	--:--	----
-----	-----	--/--	--:--	--:--	----

Refacciones:

Código:	Descripción	Cantidad
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

ANIEL GARCIA

27 de junio de 2025
Cliente
Cargo

Nombre y Firma del Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera



Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 1560592

Nombre y Firma

Centro de Servicio al cliente
0253 04 48

Philips México Commercial, SA. de CV.
Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
RFC: PMC1507018K6

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024930



Innovation + you

PHILIPS

Ubicación:

HGR NO 1

Canada 16801

Tijuana

Mexico

**Reporte de Prueba y Verificación**

Número de Caso: 0125541386

Orden de Servicio: WO-12927497

DETALLES DEL SERVICIO

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Tipo de Evento: Predictive / Preventative Maintenance

Estado del Equipo: Pass

Actividad de Servicio: Preventative Maintenance

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System

Número de Serie: USO24D1836

Código del Equipo: 795208

Número de Equipo: 114984468

UDI: (01)00884838114173(21)USO24D1836

Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
-----	-----	-----	-----------	------------	-------------

Planned Maintenance**System Information**

Software Version	10.0.4
Hardware Version	B.0

Inspection & Cleaning

Query Customer Performance Issues	Pass
Inspect Exterior Periph. & Power Cords.	Pass
Inspect & Clean Trackball	Pass
Inspect & Clean Monitor	Pass
Inspect/Clean Control Panels & Keyboard	Pass
Inspected and cleaned the transducer connector assembly (transducer and system side)?	Yes
Footswitch, Key- & Remote Control Pad	Not Installed
Inspect Casters & Brakes Operation	Pass
Clean/Check System Filters & Fans	Pass
Check Articulation motion.(monitor, etc)	Pass
Check System Battery	Pass

Performance & Peripherals

Execute Full Set of System Diagnostics	Pass
Check, Download & Clear Logs	Pass
Perform Hard-disk Maintenance	Pass
Backup of System Settings and Configs.	Pass
Check Operation All User Ctrls. & Lights	Pass

PHILIPS

Min Max UoM Resultado Conclusión Comentarios

RECIBIDO
27 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Planned Maintenance

Performance & Peripherals

Check Operation of Major Applications	Pass
Test Printers	Not Installed
Check Operation Dig. Recording Devices	Not Installed
Confirm remote connectivity	Not Installed

System Safety General

Protective Earth resistance (≤ 200 mOhm)	200	mOhm	0	Pass
Earth Leakage Current. NC, Highest val. (≤ 500 μ A)	500	μ A	0	Pass
Earth Leakage Current. SF, Highest val. (≤ 1000 μ A)	1000	μ A	0	Pass

Philips Representative Signature:

DA

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Fecha: Jun 27, 2025



Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Fed. Esp. 11980392
Mat. 98024465
IMSS



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
IMSS

Orden de Servicio Philips Healthcare


PHILIPS



Equipo: Affiniti 50 Ultrasound System
ID: 114984468
Modelo: Affiniti 50 Ultrasound System
No. De Serie: USO24D1836

Orden de Servicio: WO12927497
Cliente: HGR NO 1
Dirección: Canada 16801, 22226,
Tijuana, Baja California,
Teléfono:

CONSERVACIÓN
H.C.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

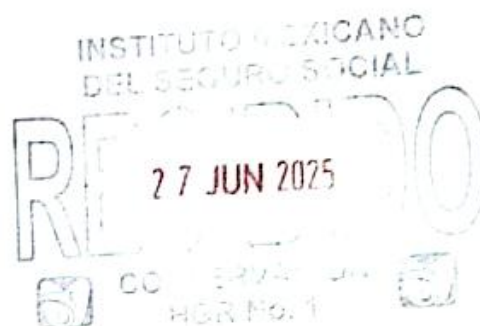

Confidencial de la Empresa Philips
Health
Systems

Copias no controladas

Centro de Servicio al cliente
800 253 04 48

Philips México Commercial, SA. de CV.
Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
RFC: PMC1507018K6



innovation + you